

tiki
medical



Una revolución en la
tecnología de respiradores

FABRICADO EN SUECIA

Diseñada para facilitar su trabajo

Tiki es un respirador protector innovador, fabricado en Suecia, para ser utilizado en entornos difíciles que presentan la necesidad de protegerse contra partículas y bacterias en suspensión. Tiki medical ha sido diseñada específicamente para un uso médico y, por tanto, es apta para su uso en el servicio de salud y emergencias. La máscara filtra el aire tanto dentro como fuera y está certificada con la clase de seguridad más alta para respiradores purificadores con ventilación (EN 12942 TM3P).

Protección ideal con máxima comodidad

El equipo Tiki ha sido diseñado teniendo como prioridad la comodidad del usuario, incluso durante largo períodos de trabajo.

Soplador con velocidades variables

Gracias al sensor sensible a la presión incorporado en la máscara, la velocidad del soplador puede adaptarse a su respiración, lo que trae consigo un nivel máximo de comodidad para el usuario.

Ajuste ergonómico

La máscara está disponible en tres tamaños diferentes: pequeño, mediano y grande — para adaptarse a caras de diferentes tamaños.

Peso ligero

A diferencia de muchos otros respiradores protectores en el mercado, la Tiki medical es ligera. Su peso es de tan solo 430 - 450 gramos, dependiendo del tamaño.

Visión despejada y fácil comunicación

Dado que el filtro de inhalación está situado en la parte superior de la máscara, el usuario goza de una visión despejada tanto si mira hacia abajo como si lo hace hacia los laterales. El filtro de exhalación está situado en la barbilla, de modo que la boca es visible. Este diseño facilita la comunicación tanto visual como verbal. Los usuarios pueden verse las caras mutuamente e incluso hablar por teléfono con la máscara puesta. Gracias a su sistema de iluminación LED incorporado, Tiki permite trabajar incluso en condiciones de oscuridad y poco espacio.

Poder respirar libremente y tener una visión despejada, y al mismo tiempo tener la máxima seguridad, son solo algunas de las ventajas de Tiki medical.






El respirador protector Tiki se alimenta mediante una batería interna con un tiempo de funcionamiento de 1-2,5 horas, dependiendo de la carga. Como accesorio se encuentra disponible una unidad de batería externa para aquellos que necesitan una duración prolongada de la batería. La máscara también está equipada con luces LED que facilitan el trabajo en condiciones de oscuridad.



El filtro de partículas protege contra todo tipo de partículas contaminantes (P3). Resulta rápido y fácil cambiar el filtro y la máscara. El filtro presenta una forma cuadrada para lograr la máxima superficie de filtrado y una larga vida útil.

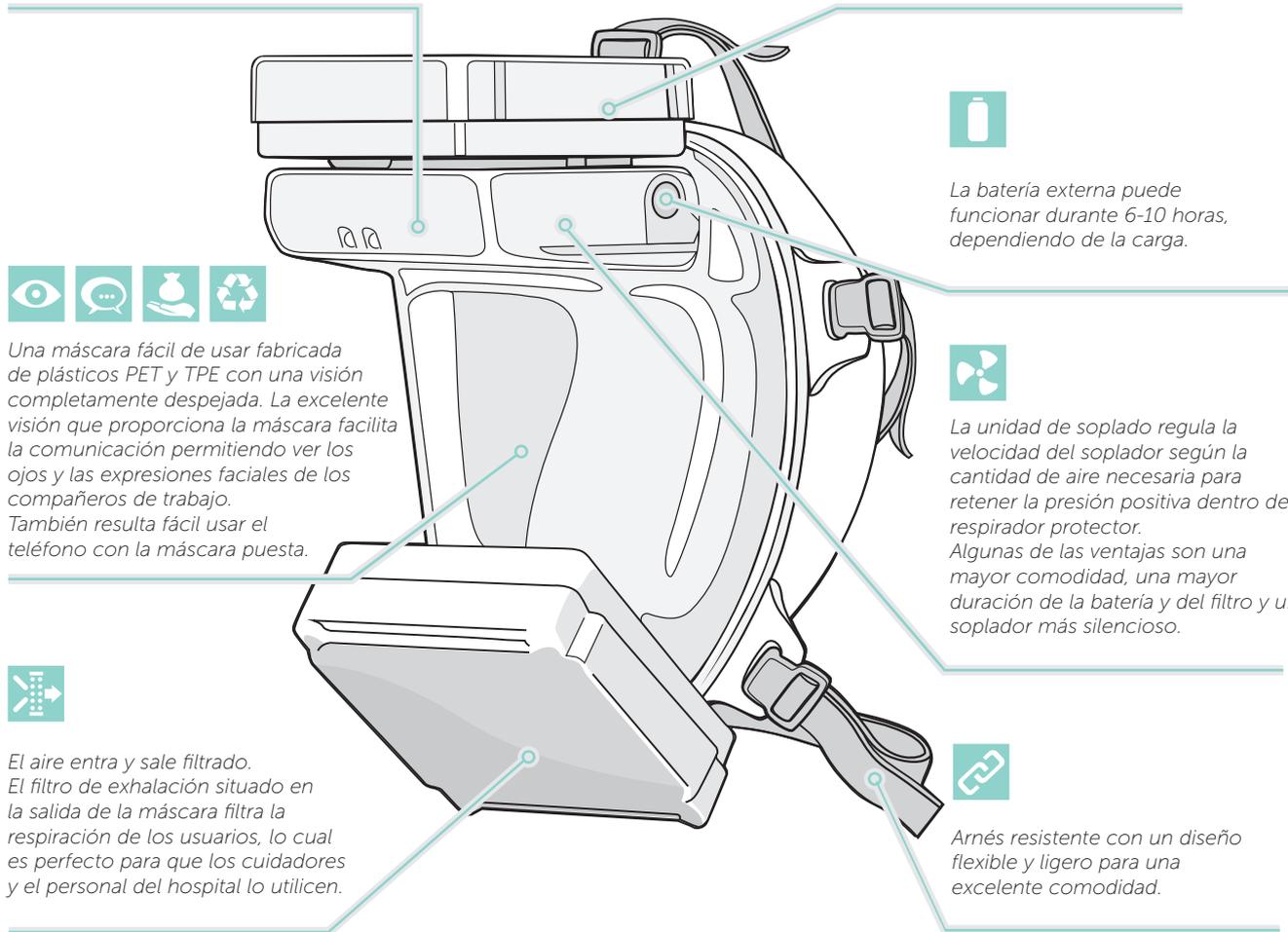

Una máscara fácil de usar fabricada de plásticos PET y TPE con una visión completamente despejada. La excelente visión que proporciona la máscara facilita la comunicación permitiendo ver los ojos y las expresiones faciales de los compañeros de trabajo. También resulta fácil usar el teléfono con la máscara puesta.



La batería externa puede funcionar durante 6-10 horas, dependiendo de la carga.



La unidad de soplado regula la velocidad del soplador según la cantidad de aire necesaria para retener la presión positiva dentro del respirador protector. Algunas de las ventajas son una mayor comodidad, una mayor duración de la batería y del filtro y un soplador más silencioso.



El aire entra y sale filtrado. El filtro de exhalación situado en la salida de la máscara filtra la respiración de los usuarios, lo cual es perfecto para que los cuidadores y el personal del hospital lo utilicen.



Arnés resistente con un diseño flexible y ligero para una excelente comodidad.

¿Cómo funciona Tiki?

El equipo Tiki funciona asegurando una presión positiva dentro de la máscara. La presión positiva es generada por un soplador que funciona con batería y aspira aire dentro de la máscara a través de un filtro purificador. Gracias a un sensor sensible a la presión incorporado, la máscara retiene la presión positiva completamente en sintonía con su respiración. Así se obtiene una mayor comodidad frente a un respirador convencional. Este tipo de adaptación individual tiene la ventaja añadida de mejorar la vida útil tanto de la batería como del filtro. La máscara también ofrece un sistema de alarma incorporado que le permite saber si

el nivel de la batería es demasiado bajo, si la presión de la máscara es incorrecta o si el filtro está obstruido o necesita un cambio.

Fácil de usar

Tiki medical está compuesto de cinco componentes: Soplador, filtro de inhalación (blanco), filtro de exhalación (verde), máscara y arnés. El equipo Tiki está listo para ser usado desde el momento en que se fija su arnés de fácil ajuste en su lugar. El filtro se puede cambiar rápida y fácilmente sin necesidad de herramientas. La máscara en sí misma también puede ser cambiada rápida y fácilmente si se raya o se vuelve inutilizable.



Diez buenas razones para elegir Tiki medical

- Protección respiratoria única que filtra el aire tanto dentro como fuera
- Máxima clase de protección según las normas europeas
- Extremadamente cómoda gracias a su suministro de aire controlado por un sensor
- Ligera: desde solo 430 gramos
- Proporciona una excelente visibilidad y comunicación
- Larga duración de la batería: hasta diez horas usando una batería externa
- Filtro P3 cuadrado para un rendimiento óptimo y duradero
- Iluminación LED incorporada
- Resulta rápido y fácil cambiar la máscara y el filtro
- Económica: bajo costo total de propiedad



TIKI MEDICAL INFORMACIÓN ES 1091-24 01/2021

Para más información y datos, consulte tikimed.com.

Piense en el medio ambiente

Como la máscara y el filtro se pueden reutilizar, el residuo es menor en comparación con los productos desechables. La máscara está fabricada de plásticos PET-G y TPE, y puede reciclarse. En el proceso de fabricación solo se emplea energía verde de fuentes sostenibles. Tiki trabaja activamente para reducir de forma continua los residuos en la producción.

Pruebe Tiki

No dude en contactarnos si desea más información, solicitar un presupuesto o probarla.

¡Llámenos o envíenos un correo hoy mismo!
+46 8-353 249 (días laborables 8am–5pm GMT)
info@tikisafety.com

tiki

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
SUECIA

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com

CE
2797

