

tiki
medical



Hengityssuojainteknologian vallankumous

MADE IN SWEDEN

Suunniteltu helpottamaan sinun työtäsi

Tiki medical on innovatiivinen Ruotsissa valmistettu hengityssuojain, joka on tarkoitettu käytettäväksi haasteellisissa ympäristöissä, joissa tarvitaan suojaa ilmassa olevilta hiukkasilta ja mikrobeilta. Tiki medical on suunniteltu terveydenhuollon tarpeisiin, ja se sopii erityisesti terveys- ja pelastuspalveluiden henkilöstön käyttöön. Maski suodattaa sekä sisään että uloshengitysilmaa, ja se on ilmaa puhdistavien hengityssuojaimien korkeimman suojausluokan mukaan sertifioitu (EN 12942 TM3P).

Paras suoja yhdistettynä parhaaseen mukavuuteen

Tiki on suunniteltu käyttäjän mukavuutta ajatellen, myös pitkäaikaisessa käytössä.

Puhallin vaihtuvalla nopeudella

Maskin sisään rakennetun paineherkän anturin ansiosta puhaltimen nopeus voidaan sovittaa hengityksesi mukaan, joka takaa parhaan käyttömukavuuden.

Ergonominen istuvuus

Maski on saatavilla kolmessa eri koossa: pieni, keskisuuri ja suuri – se sopii kaikille kasvoille.

Kevyt

Toisin kuin monet muut markkinoilla olevat hengityssuojaimet, Tiki medical on kevyt ja painaa vain 430–450 grammaa koosta riippuen.

Esteetön näkömää ja helppo viestintää

Yläosaan sijoitettu sisäänhengityssuodatin antaa esteettömän näkömää sekä alaspäin että sivuille. Uloshengityssuodatin on sijoitettu leuan tienoille, joten suu jää näkyviin. Tämä jättää kasvojen ilmeet näkyviin, helpottaa sekä visuaalista että sanallista viestintää ja mahdollistaa puhelimen käytön. Integroidun LED-valaisimen ansiosta Tiki mahdollistaa työskentelyn myös pimeissä olosuhteissa.

Kyky hengittää vapaasti ja nähdä esteettömästi turvallisuudesta tinkimättä ovat vain muutamia Tiki medical-maskin etuja.






Tiki-hengityssuojain saa virtansa sisäisestä akusta, jonka käyttöaika on 1–2,5 tuntia kuormituksesta riippuen. Lisäakku on saatavilla lisävarusteena, jos tarvitaan pidempää käyttöaika. Maskissa on myös LED- valaisin, joka mahdollistaa työskentelyn pimeässä.



P3- tason hiukkassuodattimet suojaavat ilmaitse leviäviltä partikkeleilta. Suodattimet ovat nelikulmaisia, jolloin saavutetaan suurin suodatinpinta-ala sekä pitkä käyttöikä. Lisäksi suodattimien ja maskin vaihtaminen on vaivatonta..

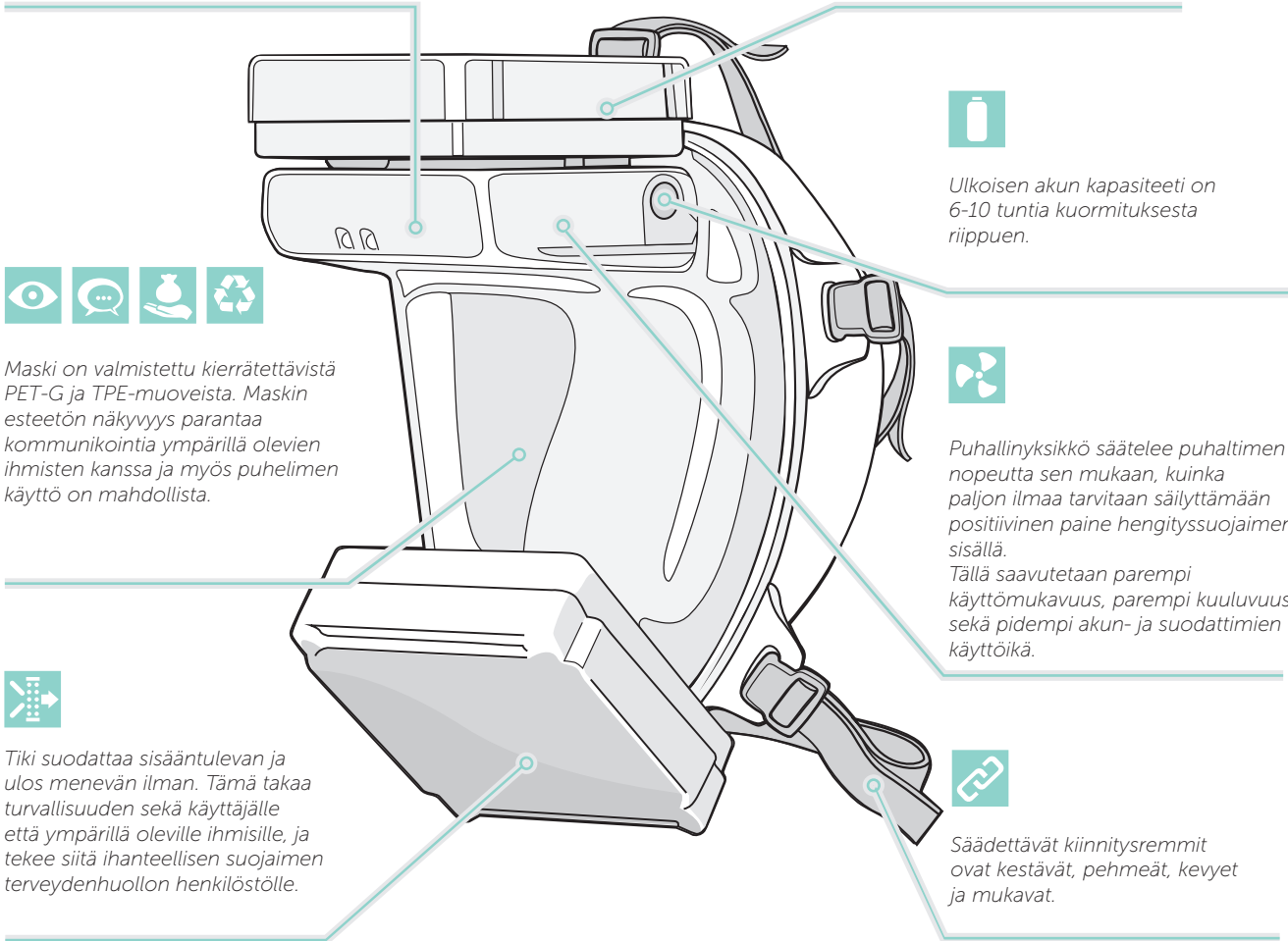

Miten Tiki toimii?

Tiki pitää positiivisen paineen hengityssuojaimen sisällä. Positiivinen paine luodaan akkukäyttöisellä puhaltimella, joka vie ilmaa maskiin suodattimen läpi. Maski ylläpitää positiivista painetta automaattisen paineanturin avulla oman hengityksesi mukaan, jolloin saavutetaan ylivertainen mukavuus verrattuna perinteisiin hengityssuojaimiin. Tämä yksilöllinen ominaisuus parantaa akun- ja suodattimien käyttöikä. Puhallinyksikössä on sisäänrakennettu varoitusjärjestelmä, joka

varoittaa käyttäjää, jos akun virta on vähissä, maskin paine on väärä, suodatin on tukossa tai likaantunut.

Helppokäyttöinen

Tiki medical koostuu viidestä komponentista: Puhallin, sisäänhengityssuodatin (valkoinen), uloshengityssuodatin (vihreä), maski ja kiinnitysremmit. Tiki on käyttövalmis heti, kun kiinnitysremmit, tuuletin ja suodattimet ovat asennettu paikoilleen. Suodattimet voidaan vaihtaa helposti ilman työkaluja ja itse maski, jos se naarmuuntuu tai likaantuu.



Kymmenen hyvää syytä valita Tiki-medical hengityssuojain

- Ainutlaatuinen hengityssuojain, joka suodattaa ilman sekä sisään tullessa että ulos mennessä
- Eurooppalaisten standardien mukainen korkein suojausluokka
- Vaivaton hengittää anturiohjatun ilmansyötön ansiosta
- Kevyt, paino vain 430 grammaa
- Erinomainen näkyvyys ja kommunikointi
- Pitkä akun kesto: jopa kymmenen tuntia ulkoisella akulla
- P3-suodattimet tarjoavat korkeimman tason suojan
- Integroitu LED-valaisin
- Vaivaton suodattimien ja maskin vaihto
- Taloudellinen: pienet kokonaiskustannukset



TIKI SAFETY INFO EN 1091-31 01/2021

Lisätietoja osoitteesta
tikimed.com

Ajattele ympäristöä

Tiki-tuotteet valmistetaan kestävän kehityksen mukaisesti, valmistuksessa käytetään vihreää ekologista energiaa ja pyrimme aktiivisesti vähentämään tuotannossa syntyvää jätettä. Tiki-maski on valmistettu PET-G- ja TPE-muoveista, se voidaan kierrättää ja näin on mahdollista vähentää jätteen määrää kertakäyttötuoiteisiin verrattuna.

Ota yhteyttä ja kokeile

Ota yhteyttä, pyydä meiltä tarjous ja kokeile.

Soita tai lähetä viesti jo tänään!
+46 8-353 249 (arkisin 8.00–17.00 GMT)
info@tikisafety.com

tiki

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-197 40 Bro
RUOTSI

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com

CE
2797