

tiki
medical



Uma revolução na
tecnologia dos respiradores

FEITO NA SUÉCIA

Concebida para facilitar o seu trabalho

A máscara Tiki é um inovador respirador de proteção fabricado na Suécia, para utilização em ambientes desafiantes em que exista a necessidade de proteger o utilizador contra partículas e bactérias transportadas pelo ar. A máscara Tiki medical foi concebida especificamente para uso médico e é, por isso, particularmente adequada para serviços de saúde e de emergência. A máscara filtra o ar tanto à entrada como à saída e está certificada em conformidade com a classe de segurança mais elevada para respiradores purificadores de ar (norma EN 12942 TM3P).

A proteção ideal aliada ao máximo conforto

A máscara Tiki foi concebida com o conforto do utilizador em primeiro plano, mesmo durante longos períodos de trabalho.

Ventilador com diferentes velocidades

Graças ao sensor sensível à pressão integrado na máscara, a velocidade do ventilador pode ser adaptada à sua respiração, o que resulta no máximo conforto para o utilizador.

Ajuste ergonómico

A máscara está disponível em três tamanhos diferentes: pequeno, médio e grande - para se adaptar a todos os tipos de rosto.

Peso reduzido

Ao contrário de muitos outros respiradores de proteção no mercado, a máscara Tiki medical é leve, pesando apenas entre 430 e 450 gramas, dependendo do tamanho.

Visão desobstruída e comunicação fácil

Uma vez que o filtro de inalação se situa na parte superior da máscara, a sua visão fica desobstruída, tanto para baixo como para os lados. O filtro de expiração encontra-se junto ao queixo, de modo a que a boca fique visível. Este desenho facilita tanto a comunicação visual como verbal. É possível ver o rosto dos interlocutores e até mesmo falar ao telefone enquanto usa a máscara. Com o seu sistema de iluminação LED integrado, a máscara Tiki permite trabalhar em condições de fraca luminosidade ou com pouco espaço.

Poder respirar livremente e ter uma visão desobstruída, conferindo ao mesmo tempo maior segurança, são apenas algumas das vantagens da máscara Tiki medical.






O respirador de proteção Tiki é alimentado por uma bateria interna com um tempo de funcionamento de 1 a 2,5 horas, dependendo da carga. Está disponível uma unidade de bateria externa, como acessório, para aqueles que necessitam de mais bateria. A máscara está ainda equipada com luzes LED que facilitam o trabalho em condições com pouca luminosidade.



O filtro de partículas protege contra todos os tipos de partículas poluentes (P3). A substituição do filtro e da máscara é rápida e simples. O filtro é quadrado, de modo a obter uma superfície de filtragem máxima e uma vida útil prolongada.

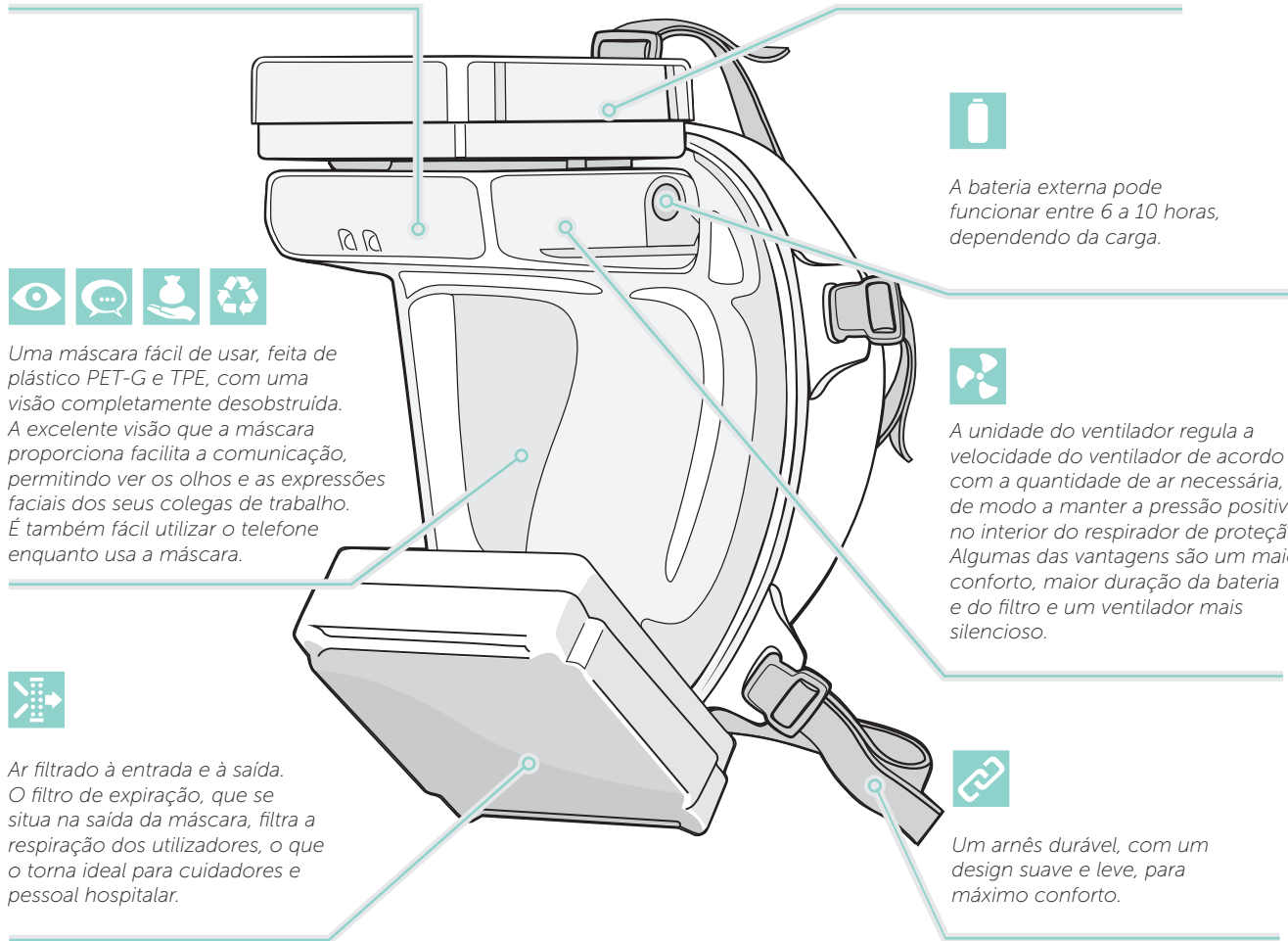

Uma máscara fácil de usar, feita de plástico PET-G e TPE, com uma visão completamente desobstruída. A excelente visão que a máscara proporciona facilita a comunicação, permitindo ver os olhos e as expressões faciais dos seus colegas de trabalho. É também fácil utilizar o telefone enquanto usa a máscara.



Ar filtrado à entrada e à saída. O filtro de expiração, que se situa na saída da máscara, filtra a respiração dos utilizadores, o que o torna ideal para cuidadores e pessoal hospitalar.

Como funciona a máscara Tiki?

A máscara Tiki funciona ao garantir uma pressão positiva no interior da mesma. A pressão positiva é gerada por um ventilador a bateria, que aspira o ar para o interior da máscara através de um filtro purificador. Através de um sensor integrado sensível à pressão, a máscara mantém a pressão positiva completamente ajustada à sua respiração, o que oferece maior conforto em comparação com um respirador tradicional. Esta opção de personalização tem a vantagem adicional de melhorar a vida útil tanto da bateria como do filtro. A máscara possui ainda um sistema de aviso integrado que lhe permite saber se a energia da bateria está demasiado baixa, se a pressão

da máscara está incorreta ou se o filtro está entupido ou se necessita de ser substituído.


Fácil de usar

A máscara Tiki medical é composta por cinco componentes: o ventilador, o filtro de inalação (branco), o filtro de expiração (verde), a máscara e o arnés. A máscara Tiki está pronta a ser utilizada a partir do momento em que tiver fixado o arnés, facilmente ajustável. O filtro pode ser substituído de forma rápida e simples, sem necessidade de quaisquer ferramentas. A própria máscara também pode ser substituída de forma rápida e simples, no caso de ficar arranhada ou inutilizável.



Dez boas razões para optar pela máscara Tiki medical

- Proteção respiratória única que filtra o ar à entrada e à saída
- Classe de proteção mais elevada em conformidade com as normas europeias
- Extremamente confortável devido ao fornecimento de ar controlado por sensores
- Peso reduzido: desde 430 gramas
- Proporciona excelente visibilidade e comunicação
- Duração prolongada da bateria: até dez horas com a bateria externa
- Filtro P3 quadrado para um desempenho otimizado e duradouro
- Iluminação LED integrada
- Tanto a substituição da máscara como do filtro é rápida e simples.
- Económica: custo total de propriedade reduzido

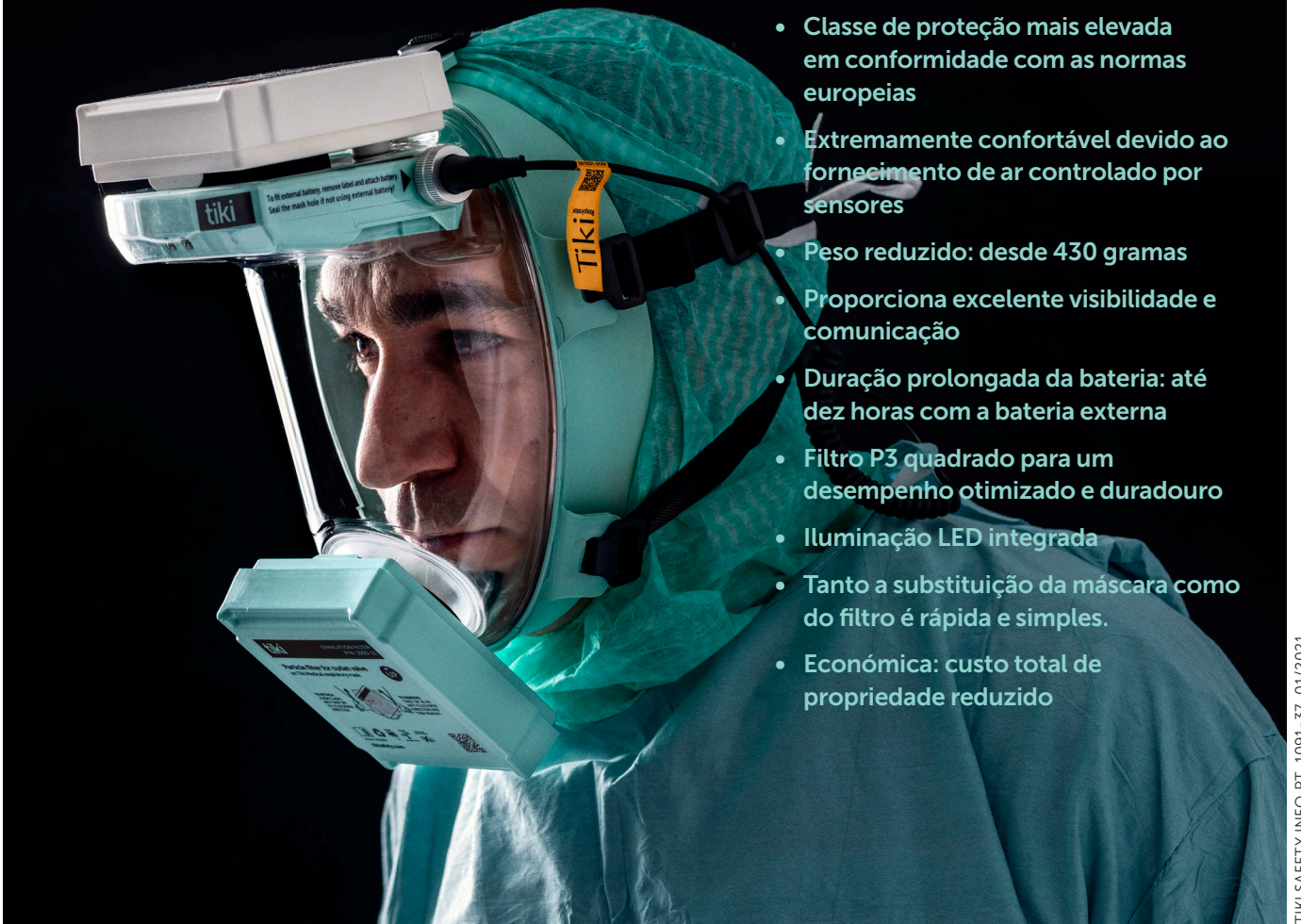

TIKI SAFETY INFO PT 1091-37 01/2021

Em tikimed.com encontrará mais informações e factos sobre a máscara Tiki.

Pense no ambiente

Como a máscara e o filtro podem ser reutilizados, o desperdício é menor em comparação com produtos descartáveis. Além disso, a máscara é feita de plásticos PET-G e TPE e pode ser reciclada. Durante o fabrico, apenas é utilizada energia verde de fontes sustentáveis e a Tiki trabalha ativamente para reduzir continuamente o desperdício na produção.

Tiki a sério

Não hesite em contactar-nos se quiser saber mais, obter um orçamento ou experimentar a máscara a sério.

Ligue ou envie-nos um e-mail hoje!
+46 8-353 249 (dias úteis, das 8h00 às 17h00 GMT)
info@tikisafety.com

tiki

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-197 40 Bro
SUÉCIA

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com

CE
2797

