



## Produkte

HERGESTELLT IN SCHWEDEN

# Ein revolutionärer Atemschutz, der für das Gesundheitswesen entwickelt wurde

Tiki medical ist eines der fortschrittlichsten Sicherheitsprodukte auf dem Markt. Sie wurde in Schweden entwickelt, um Personal zu schützen, das in gefährlichen Umgebungen arbeitet. Die Maske hat sowohl einen Inhalations- als auch einen Ausatemfilter und ist daher für den Einsatz im Gesundheitswesen

geeignet. Das Gebläse passt den Luftstrom automatisch an den Bedarf des Anwenders an und erleichtert so das Atmen auch über längere Zeiträume. Tiki hat eingebaute LEDs und ist nach der höchsten Schutzklasse für motorbetriebene luftreinigende Atemschutzmasken (PAPR), EN 12942 TM3P, zertifiziert.

## Tiki medical-Starterkit




### Tiki medical

Enthält alle Teile, die benötigt werden, um Tiki medical in Betrieb zu nehmen: Eine Maske, eine Kopfbefestigung, zwei Filter, ein weißer Filter für die Inhalation und ein grüner Filter für die Ausatmung, ein Gebläse mit eingebautem Akku, ein Ladegerät und eine Schraubversiegelung. Wählen Sie zwischen drei Maskengrößen: S, M oder L.

- 1200-51 TikiSTART Medical Small Standard
- 1200-52 TikiSTART Medical Medium Standard
- 1200-53 TikiSTART Medical Large Standard



## Austauschteile

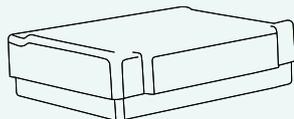


### TikiFILTER weiß für die Inhalation

Auswechselbare P3-Partikel-Filter.

1005-51 P3 Weißfilter 2 St.

1005-52 P3 Weißfilter 120 St.

1005-53 P3 Weißfilter 2x30 St.

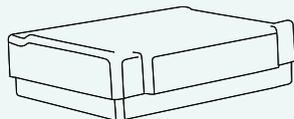

### TikiFILTER grün für die Ausatmung

Auswechselbare P3-Partikel-Filter.

1005-56 P3 Grünfilter 2 St.

1005-57 P3 Grünfilter 120 St.



### TikiMASK Medical 5er-Pack


Auswechselbare Masken.

1210-51 5er-Pack grüne Masken S

1210-52 5er-Pack grüne Masken M

1210-53 5er-Pack grüne Masken L


## Zubehör

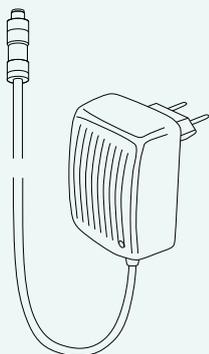

### TikiCHARGER

Ladegerät für AC-Steckdosen.


1013-53 Ladegerät

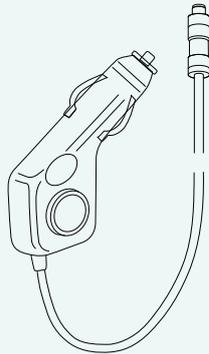

### TikiCAR Ladegerät

Autoladegerät für 12-24V.


1080-51 Autoladegerät

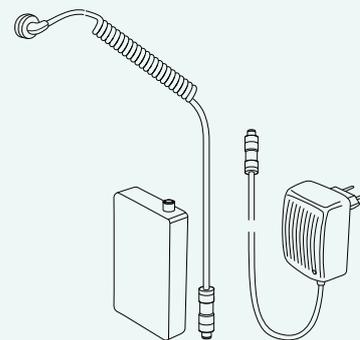

### TikiEXTERN

Set mit externem Akku, Ladegerät und Kabel. Der externe Akku hat eine hohe Kapazität. Außerdem verfügt er über einen Gürtelclip zur bequemen Befestigung.

1007-51 Externer Akku und Ladegerät

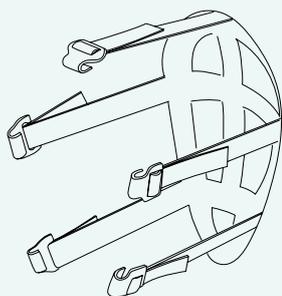

### TikiHARNESS 5er-Pack

Weiche Kopfbefestigung, um die Maske in Position zu halten.


1012-51 Kopfbefestigung 5er-Pack



### Schraubdichtung

Verschließen Sie das Loch in der Maske auf der linken Seite, an dem der externe Akku angeschlossen ist.

1121-52 Tiki-Schraubdichtung

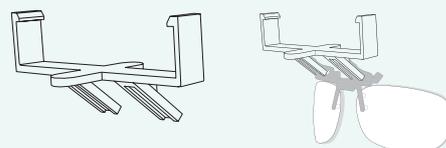

### Brillenhalter

Eine Halterung zum Anbringen von "Flip-up"-Brillen im Inneren der Maske.


1120-51 Tiki-Brillenhalter



Tiki ist batteriebetrieben mit einem internen Akku, der je nach Belastung 1-2,5 Stunden hält. Als Zubehör gibt es einen leistungsfähigeren externen Akku. Die Gebläseeinheit ist mit LED-Leuchten ausgestattet, die das Arbeiten bei Dunkelheit erleichtern. Die Gebläseeinheit ist mit LED-Leuchten ausgestattet, die das Arbeiten bei Dunkelheit erleichtern.



Der Partikelfilter schützt vor allen Arten von partikelförmigen Schadstoffen (P3). Sowohl der Filter als auch die Maske können schnell und einfach gewechselt werden. Der Filter ist quadratisch geformt, um eine maximale Filterfläche und eine lange Standzeit zu erreichen.

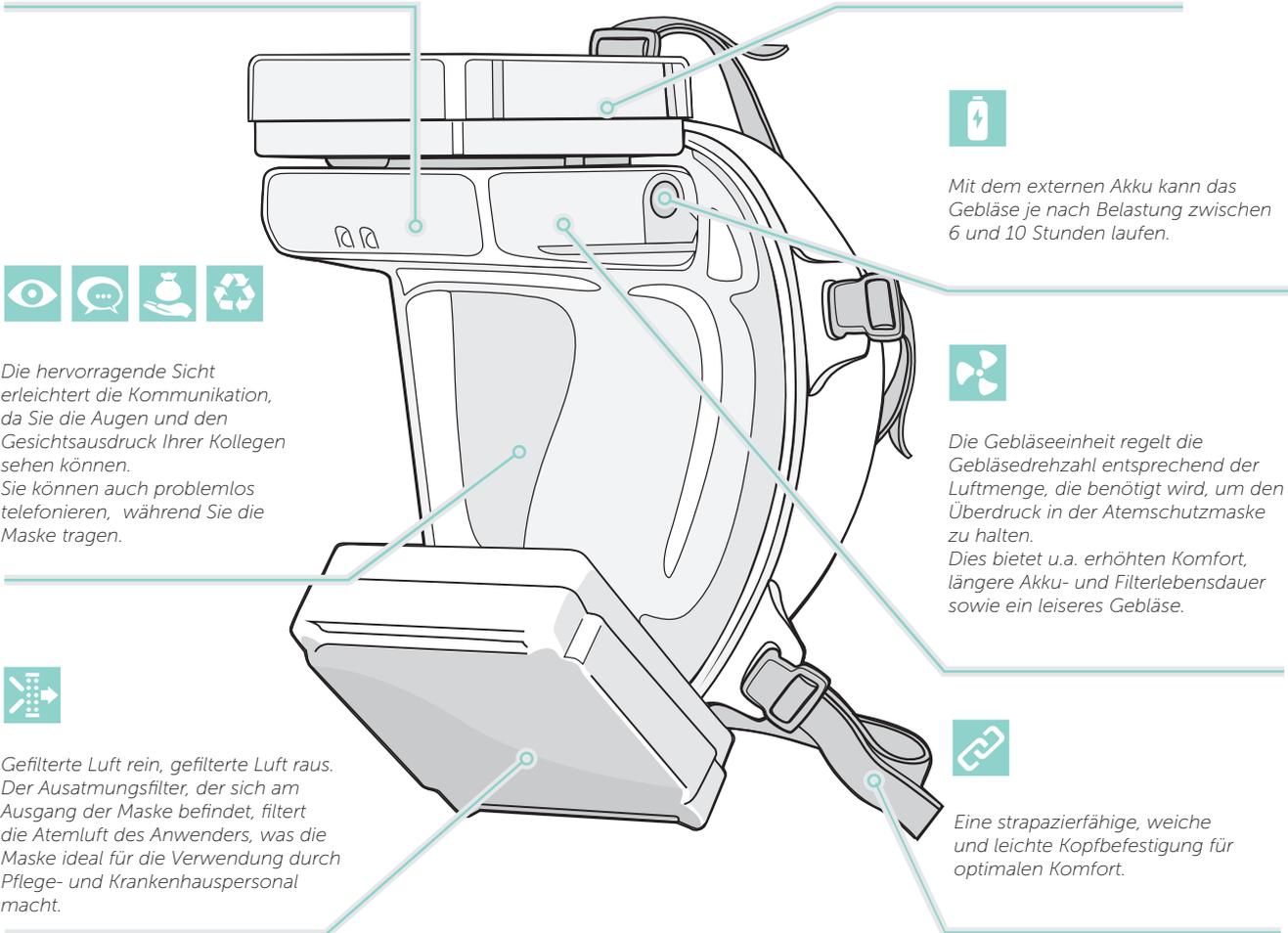

Die hervorragende Sicht erleichtert die Kommunikation, da Sie die Augen und den Gesichtsausdruck Ihrer Kollegen sehen können. Sie können auch problemlos telefonieren, während Sie die Maske tragen.



Mit dem externen Akku kann das Gebläse je nach Belastung zwischen 6 und 10 Stunden laufen.



Die Gebläseeinheit regelt die Gebläsedrehzahl entsprechend der Luftmenge, die benötigt wird, um den Überdruck in der Atemschutzmaske zu halten. Dies bietet u.a. erhöhten Komfort, längere Akku- und Filterlebensdauer sowie ein leiseres Gebläse.



Gefilterte Luft rein, gefilterte Luft raus. Der Ausatemfilter, der sich am Ausgang der Maske befindet, filtert die Atemluft des Anwenders, was die Maske ideal für die Verwendung durch Pflege- und Krankenhauspersonal macht.



Eine strapazierfähige, weiche und leichte Kopfbefestigung für optimalen Komfort.

