

tiki
medical



Productos

FABRICADO EN SUECIA

Una protección respiratoria revolucionaria diseñada específicamente para la salud

Tiki medical es uno de los productos de seguridad más avanzados del mercado y ha sido desarrollado en Suecia para proteger al personal que trabaja en entornos peligrosos. La máscara tiene tanto un filtro de inhalación como de exhalación, por lo que es apta para su uso en operaciones de cuidado de salud.

El soplador ajusta automáticamente el flujo de aire que exige el usuario, facilitando la respiración incluso en periodos prolongados. Tiki tiene LED incorporados y está certificada con la clase de protección más alta para respiradores purificadores con ventilación (PAPR), EN 12942 TM3P.

Kit básico Tiki medical



Tiki medical


Contiene todas las partes que necesita para empezar a usar Tiki medical: Una máscara, un arnés, dos filtros, un filtro blanco para inhalación y uno verde para exhalación, un soplador con batería incorporada, un cargador y un sello de rosca.

Puede elegir entre tres tamaños de máscara: S, M o L.

- 1200-51 TikiSTART Medical Pequeña Estándar
- 1200-52 TikiSTART Medical Media Estándar
- 1200-53 TikiSTART Medical Grande Estándar




Piezas de repuesto

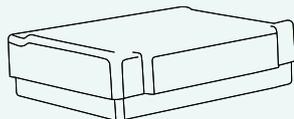

FILTRO Tiki blanco para inhalación

Filtros de partículas P3 intercambiables.

- 1005-51 Filtros blancos P3 2 unidades
- 1005-52 Filtros blancos P3 120 unidades
- 1005-53 Filtros blancos P3 2x30 unidades

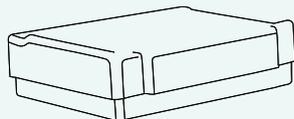

FILTRO Tiki verde para exhalación

Filtros de partículas P3 intercambiables.

- 1005-56 Filtros verdes P3 2 unidades
- 1005-57 Filtros verdes P3 120 unidades




MÁSCARA médica Tiki paquete de 5

Máscaras intercambiables.

- 1210-51 Paquete de 5 máscaras verdes S
- 1210-52 Paquete de 5 máscaras verdes M
- 1210-53 Paquete de 5 máscaras verdes L


Accesorios

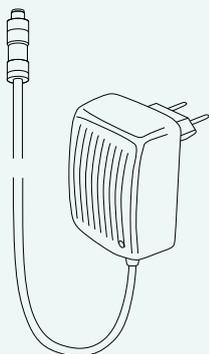

CARGADOR Tiki

Cargador para tomas CA.


- 1013-53 Cargador

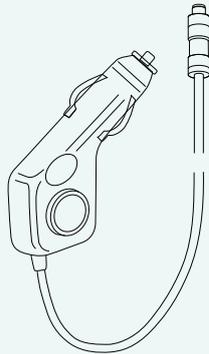

CARGADOR DE COCHE Tiki

Cargador de coche para 12-24V.


- 1080-51 Cargador de coche

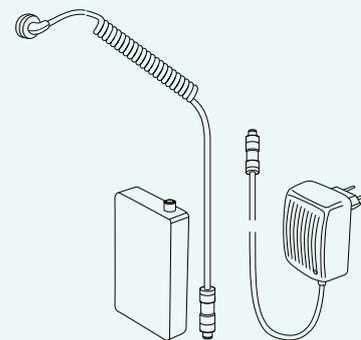

BATERÍA EXTERNA Tiki

Kit con batería externa, cargador y cable. La batería externa tiene una gran capacidad. También dispone de un clip para el cinturón para una colocación cómoda.


- 1007-51 Batería externa y cargador

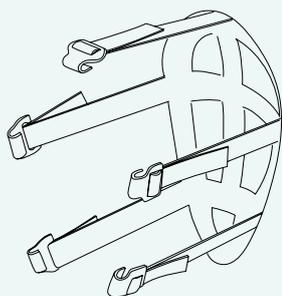

ARNÉS Tiki paquete de 5

Arnés suave para sujetar bien la máscara.


- 1012-51 Arnés paquete de 5

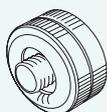

Sello de rosca

Sella el agujero de la máscara situado en el lado izquierdo, donde se conecta la batería externa.

- 1121-52 Sello de rosca Tiki

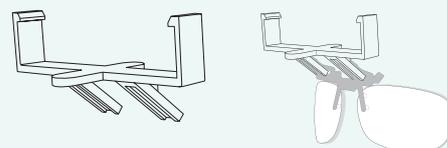

Soporte para gafas

Soporte para colocar en las gafas "abatibles" dentro de la máscara.

- 1120-51 Soporte para gafas Tiki



La máscara Tiki funciona con una batería interna que dura entre 1 y 2,5 horas, dependiendo de la carga. Como accesorio se encuentra disponible una batería externa más potente. La máscara también está equipada con luces LED que facilitan el trabajo en condiciones de oscuridad.



El filtro de partículas protege contra todo tipo de partículas contaminantes (P3). Resulta rápido y fácil cambiar tanto el filtro como la máscara. El filtro presenta una forma cuadrada para lograr la máxima superficie de filtrado y una larga vida útil.

