

tiki  
medical



Tuotteet

MADE IN SWEDEN



# Vallankumouksellista hengityssuojausta terveydenhuoltoon

Tiki medical on yksi markkinoiden edistyneimmistä turvallisuustuotteista. Se on kehitetty Ruotsissa suojaamaan ihmisiä, jotka työskentelevät vaarallisissa ympäristöissä. Maskissa on sekä sisään- että uloshengityssuodatin, joten se suojaa käyttäjää ja ympärillä olevia ihmisiä. Puhallin säätelee ilman virtausta

automaattisesti käyttäjän tarpeen mukaan, jolloin hengittäminen on helppoa myös pidempiaikaisessa käytössä. Tikissä on integroitu LED-valaisin, ja se on sertifioitu käyttövoimaisten ilmaa puhdistavien hengityslaitteiden (PAPR) korkeimman suojausluokan EN 12942 TM3P mukaan.

## Tiki medical -aloituspakkaus



### Tiki medical

Sisältää kaikki osat, joita tarvitaan Tiki medicalin käytön aloittamiseen:

Maski, valjaat, kaksi suodatinta, valkoinen suodatin sisäänhengitykseen ja vihreä suodatin uloshengitykseen, puhallin sisäänrakennetulla akulla, laturi ja ruuviiviste.

Valitse oikea maskin koko kolmesta vaihtoehdosta: S, M ja L.


1200-51 TikiSTART Medical Small Standard

1200-52 TikiSTART Medical Medium Standard

1200-53 TikiSTART Medical Large Standard




## Varaosat

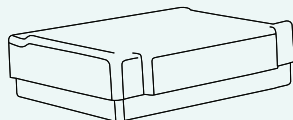

### TikiFILTER valkoinen suodatin sisäänhengitykseen

Vaihdettavat P3-hiukkassuodattimet.


- 1005-51 Valkoiset P3-suodattimet 2 kpl
- 1005-52 Valkoiset P3-suodattimet 120 kpl
- 1005-53 Valkoiset P3-suodattimet 2x30 kpl

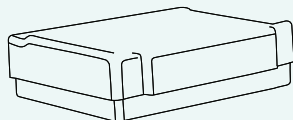

### TikiFILTER vihreä suodatin uloshengitykseen

Vaihdettavat P3-hiukkassuodattimet.

- 1005-56 Vihreät P3-suodattimet 2 kpl
- 1005-57 Vihreät P3-suodattimet 120 kpl

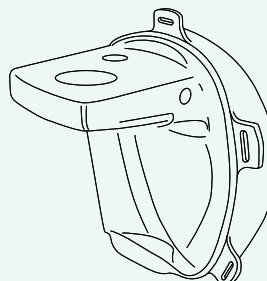


### TikiMASK Medical 5 kpl:n pakkaus

Vaihdettavat maskit.

- 1210-51 Vihreä maski, 5 kpl:n pakkaus, koko S
- 1210-52 Vihreä maski, 5 kpl:n pakkaus, koko M
- 1210-53 Vihreä maski, 5 kpl:n pakkaus, koko L


## Lisävarusteet

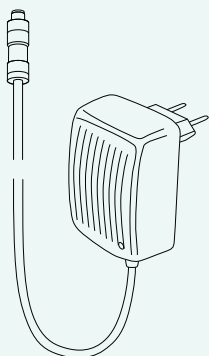

### TikiCHARGER

Laturi vaihtovirtapistorasioihin.


- 1013-53 Laturi

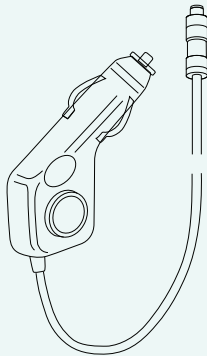

### TikiCAR-autolaturi

12–24V autolaturi.


- 1080-51 Autolaturi

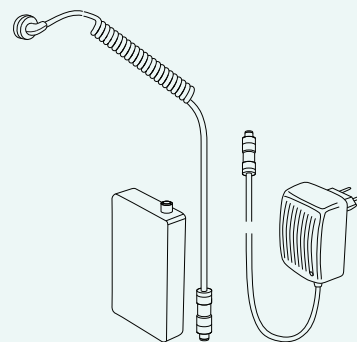

### TikiEXTERN

Setti, joka sisältää ulkoisen akun, laturin ja johdon. Ulkoisella akulla on suuri kapasiteetti. Siinä on myös vyöklipsi kätevää kiinnitystä varten.


- 1007-51 Ulkoinen akku ja laturi

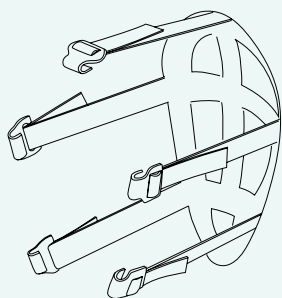

### TikiHARNES 5 kpl:n pakkaus

Pehmeät valjaat maskin paikallaan pitämiseen.


- 1012-51 Valjaat 5 kpl:n pakkaus

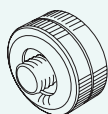

### Ruuvitiiviste

Maskin vasemmalla puolella olevan ulkoisen akun liitoskohdan reiän tiivistämiseen.

- 1121-52 Tiki-ruuvitiiviste

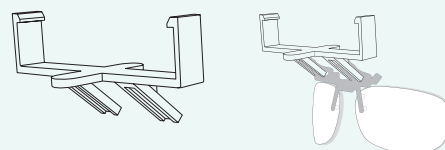

### Silmälasien pidike

Pidike, johon voidaan kiinnittää taitettavat silmälasit maskin sisällä.

- 1120-51 Tiki -silmlälasien pidike



Tiki saa virtansa sisäisestä akusta, joka kestää noin 1–2,5 tuntia kuormituksesta riippuen. Tehokkaampi ulkoinen akku on saatavilla lisävarusteena. Puhallinsikkö on varustettu LED-valaisimella, jotka mahdollistavat työskentelyn pimeissä olosuhteissa.

Hiukkassuodatin suojaa kaikilta hiukkasmisilta epäpuhtauksilta (P3). Sekä suodattimen että maskin vaihtaminen on helppoa. Suodatin on nelikulmainen, jolloin saavutetaan suurin suodatinpinta-ala sekä pitkä käyttöikä.

