

tiki

medical



Producten

MADE IN SWEDEN

Revolutionaire adembescherming voor de zorg

Tiki medical is een van de meest geavanceerde veiligheidsproducten op de markt. Het is ontwikkeld in Zweden en is bedoeld om personeel in gevaarlijke omgevingen te beschermen. Het masker heeft een in- en uitlaatfilter en is zodoende geschikt voor de zorg. De blazer past de luchtstroom automatisch aan op de behoefte van de

gebruiker waardoor deze eenvoudig kan ademen, ook gedurende langere periodes. Tiki heeft ingebouwde verlichting en is gecertificeerd conform EN 12942 TM3P, de hoogste beschermingsklasse voor luchtzuiverende ademhalingstoestellen (PAPR).

Tiki medical-startpakket




Tiki medical

Bevat alle onderdelen die nodig zijn om aan de slag te gaan met Tiki medical: Een masker, hoofdbanden, twee filters, een wit inademfilter, een groen uitademfilter, een blazer met ingebouwde batterij, een oplader en een schroefafdichting. Het masker is verkrijgbaar in drie maten: S, M en L.

- 1200-51 TikiSTART Medical klein standaard
- 1200-52 TikiSTART Medical medium standaard
- 1200-53 TikiSTART Medical groot standaard



Reserveonderdelen

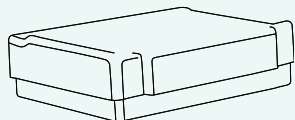


TikiFILTER wit om in te ademen

Verwisselbare P3-deeltjesfilters.

1005-51 Witte P3-filters 2 st.

1005-52 Witte P3-filters 120 st.

1005-53 Witte P3-filters 2 x 30 st.

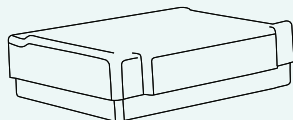


TikiFILTER groen om uit te ademen

Verwisselbare P3-deeltjesfilters.

1005-56 Groene P3-filters 2 st.

1005-57 Groene P3-filters 120 st.

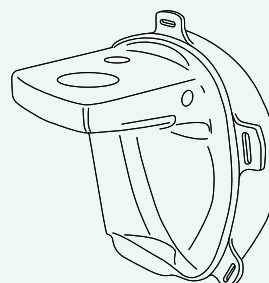

TikiMASK Medical 5-pack


Verwisselbare maskers.

1210-51 5-pack groene maskers S

1210-52 5-pack groene maskers M

1210-53 5-pack groene maskers L


Accessoires

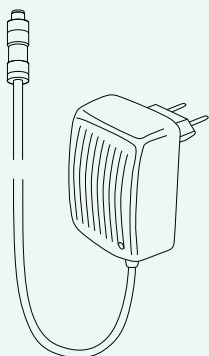

TikiCHARGER

Lader voor stopcontacten.


1013-53 Lader

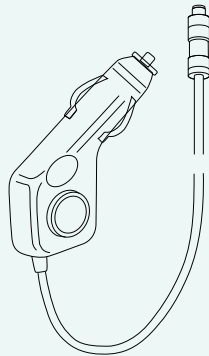

TikiCAR-lader

Autolader voor 12-24 V.

1080-51 Autolader

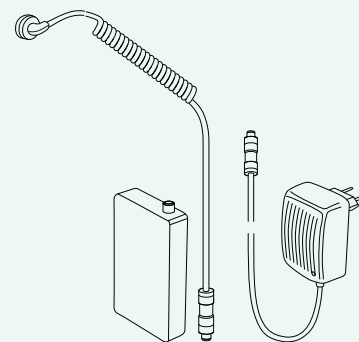


TikiEXTERN

Set met externe batterij, lader en kabel.

De externe batterij heeft een hoge capaciteit en een riemclip zodat hij eenvoudig te bevestigen is.


1007-51 Externe batterij en lader

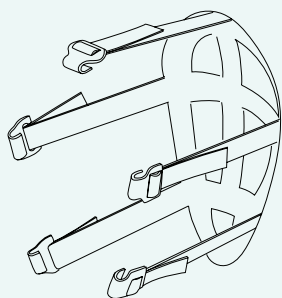

TikiHARNES 5-pack

Zachte hoofdbanden om het masker op zijn plaats te houden.


1012-51 Hoofdbanden 5-pack

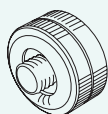

Schroefafdichting

Dicht het gat voor de externe batterijaansluiting aan de linkerkant van het masker.

1121-52 Tiki-schroefafdichting

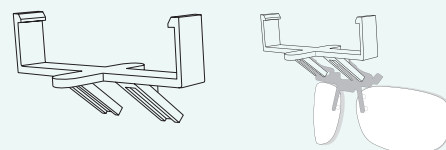

Brilhouder


Een houder om "opklapbrillen" aan te brengen in het masker.

1120-51 Tiki-brilhouder



De Tiki werkt op batterijen. De interne batterij gaat 1 tot 2,5 uur mee, afhankelijk van de belasting. Ook is er een krachtigere externe batterij verkrijgbaar als accessoire. De blaasunit is voorzien van ledlampen die het werk makkelijker maken in donkere omgevingen.

De deeltjesfilter biedt bescherming tegen alle soorten vervuulende deeltjes (P3). De filter en het masker zijn snel en eenvoudig te verwisselen. De filter is vierkant, wat zorgt voor een maximaal filteroppervlak en een lange levensduur.

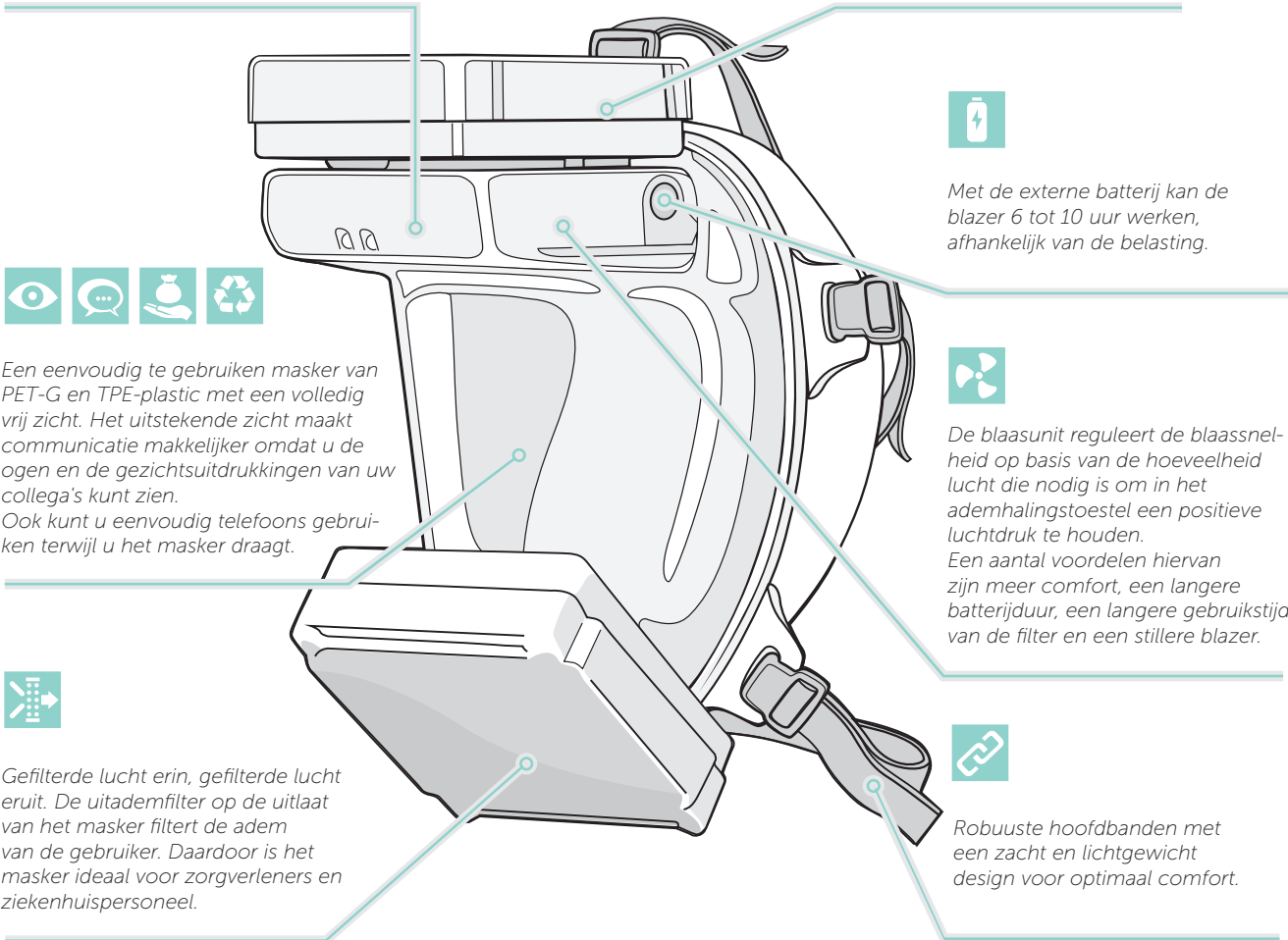

Een eenvoudig te gebruiken masker van PET-G en TPE-plastic met een volledig vrij zicht. Het uitstekende zicht maakt communicatie makkelijker omdat u de ogen en de gezichtsuitdrukkingen van uw collega's kunt zien. Ook kunt u eenvoudig telefoons gebruiken terwijl u het masker draagt.



Met de externe batterij kan de blazer 6 tot 10 uur werken, afhankelijk van de belasting.



De blaasunit reguleert de blaassnelheid op basis van de hoeveelheid lucht die nodig is om in het ademhalingstoestel een positieve luchtdruk te houden. Een aantal voordelen hiervan zijn meer comfort, een langere batterijduur, een langere gebruikstijd van de filter en een stillere blazer.



Gefilterde lucht erin, gefilterde lucht eruit. De uitademfilter op de uitlaat van het masker filtert de adem van de gebruiker. Daardoor is het masker ideaal voor zorgverleners en ziekenhuispersoneel.



Robuuste hoofdbanden met een zacht en lichtgewicht design voor optimaal comfort.

