

tiki

medical



Produtos

FEITO NA SUÉCIA



Uma proteção respiratória revolucionária concebida para os cuidados de saúde

A máscara Tiki medical é um dos produtos de segurança mais avançados do mercado, desenvolvida na Suécia para proteger o pessoal que trabalha em ambientes perigosos. A máscara possui um filtro de inalação e outro de expiração e, por isso, é adequada para ser utilizada em serviços de cuidados de saúde. O ventilador ajusta automaticamente o

fluxo de ar à respiração do utilizador, facilitando a respiração, mesmo durante períodos mais longos. A máscara Tiki possui LEDs integrados e está certificada em conformidade com a classe de proteção mais elevada para respiradores purificadores de ar motorizados (PAPR), a norma EN 12942 TM3P.

Kit de iniciação Tiki medical



Tiki medical


Contém todas as peças necessárias para começar a utilizar a máscara Tiki medical: uma máscara, um arnês, dois filtros, um filtro branco para inalação e um filtro verde para expiração, um ventilador com bateria integrada, um carregador e uma proteção do parafuso.

Escolha entre três tamanhos da máscara: S, M ou L.


1200-51 TikiSTART Medical Standard Pequena

1200-52 TikiSTART Medical Standard Média

1200-53 TikiSTART Medical Standard Grande

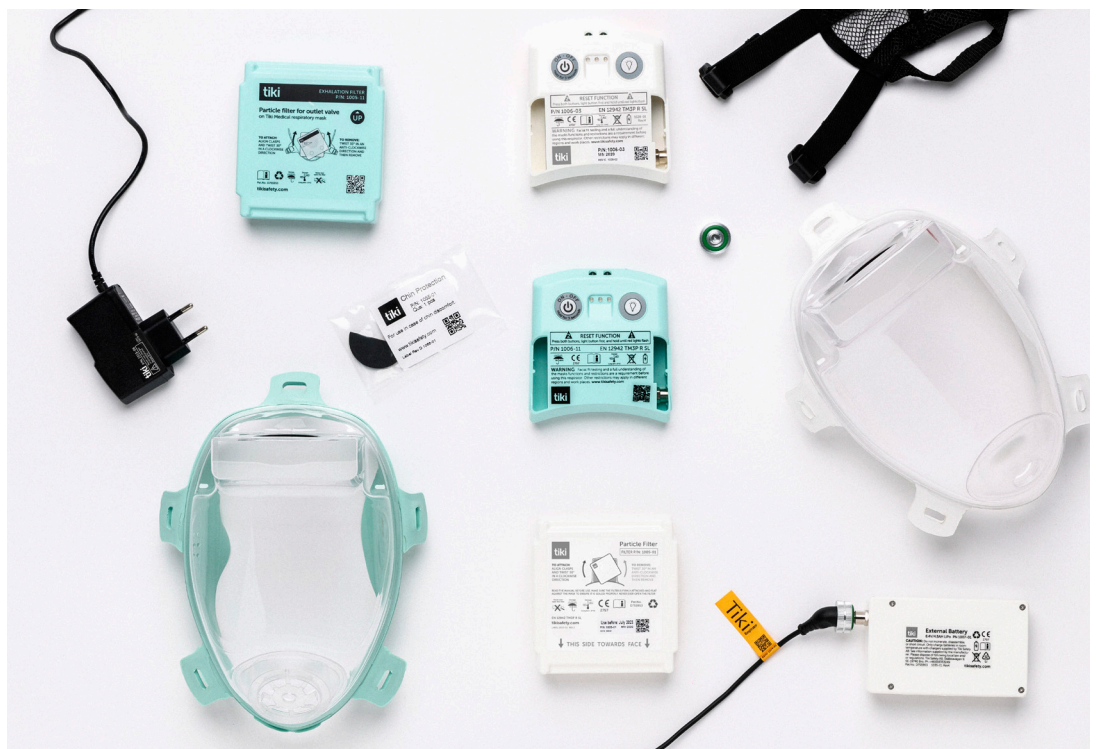

Peças de substituição

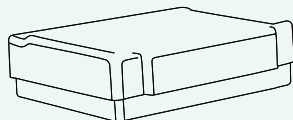


TikiFILTER branco para inalação

Filtros de partículas P3 permutáveis.

1005-51 Filtros P3 brancos 2 unid.

1005-52 Filtros P3 brancos 120 unid.

1005-53 Filtros P3 brancos 2x30 unid.

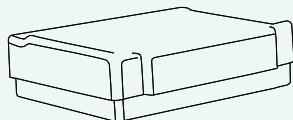


TikiFILTER verde para expiração

Filtros de partículas P3 permutáveis.

1005-56 Filtros P3 verdes 2 unid.

1005-57 Filtros P3 verdes 120 unid.

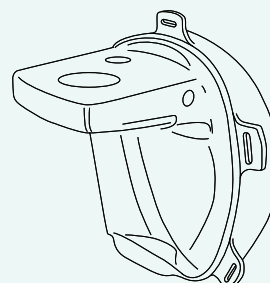

TikiMASK Medical pack de 5


Máscaras permutáveis.

1210-51 Pack de 5 máscaras verdes S

1210-52 Pack de 5 máscaras verdes M

1210-53 Pack de 5 máscaras verdes L


Acessórios

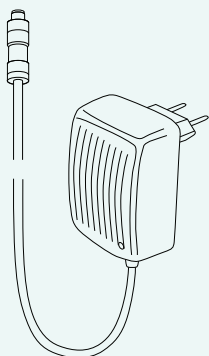

TikiCHARGER

Carregador para saídas CA.


1013-53 Carregador

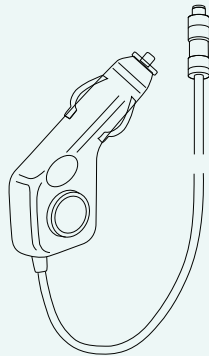

TikiCAR carregador

Carregador para automóvel de 12-24V.


1080-51 Carregador para automóvel

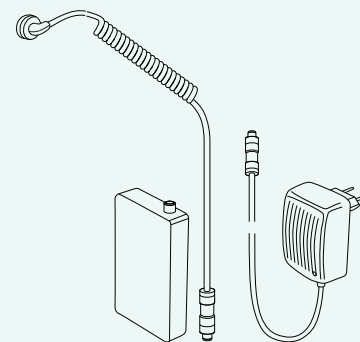

TikiEXTERN

Conjunto de bateria externa, carregador e cabo. A bateria externa tem uma capacidade elevada. Possui ainda um clipe para fixar a bateria comodamente no cinto.


1007-51 Bateria externa e carregador

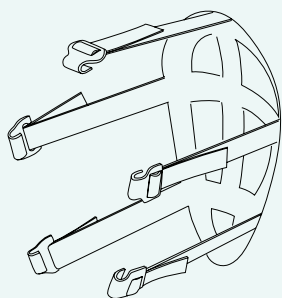

TikiHARNESSE pack de 5

Arnês macio para manter a máscara no lugar.


1012-51 Arnês pack de 5

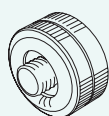

Proteção do parafuso

Tape o buraco no lado esquerdo da máscara, onde se liga a bateria externa.

1121-52 Proteção do parafuso Tiki

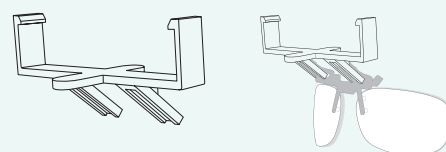

Suporte para óculos

Um suporte para colocar óculos "flip up" no interior da máscara.


1120-51 Suporte para óculos Tiki



A máscara Tiki é alimentada por uma bateria interna com uma duração de 1 a 2,5 horas, dependendo da carga. Está disponível uma bateria externa mais potente, como acessório. A unidade do ventilador está equipada com luzes LED que facilitam o trabalho em condições de pouca luminosidade.



O filtro de partículas protege contra todos os tipos de partículas poluentes (P3). Tanto a substituição do filtro como da máscara é rápida e simples. O filtro é quadrado, de modo a obter uma superfície de filtragem máxima e uma vida útil prolongada.

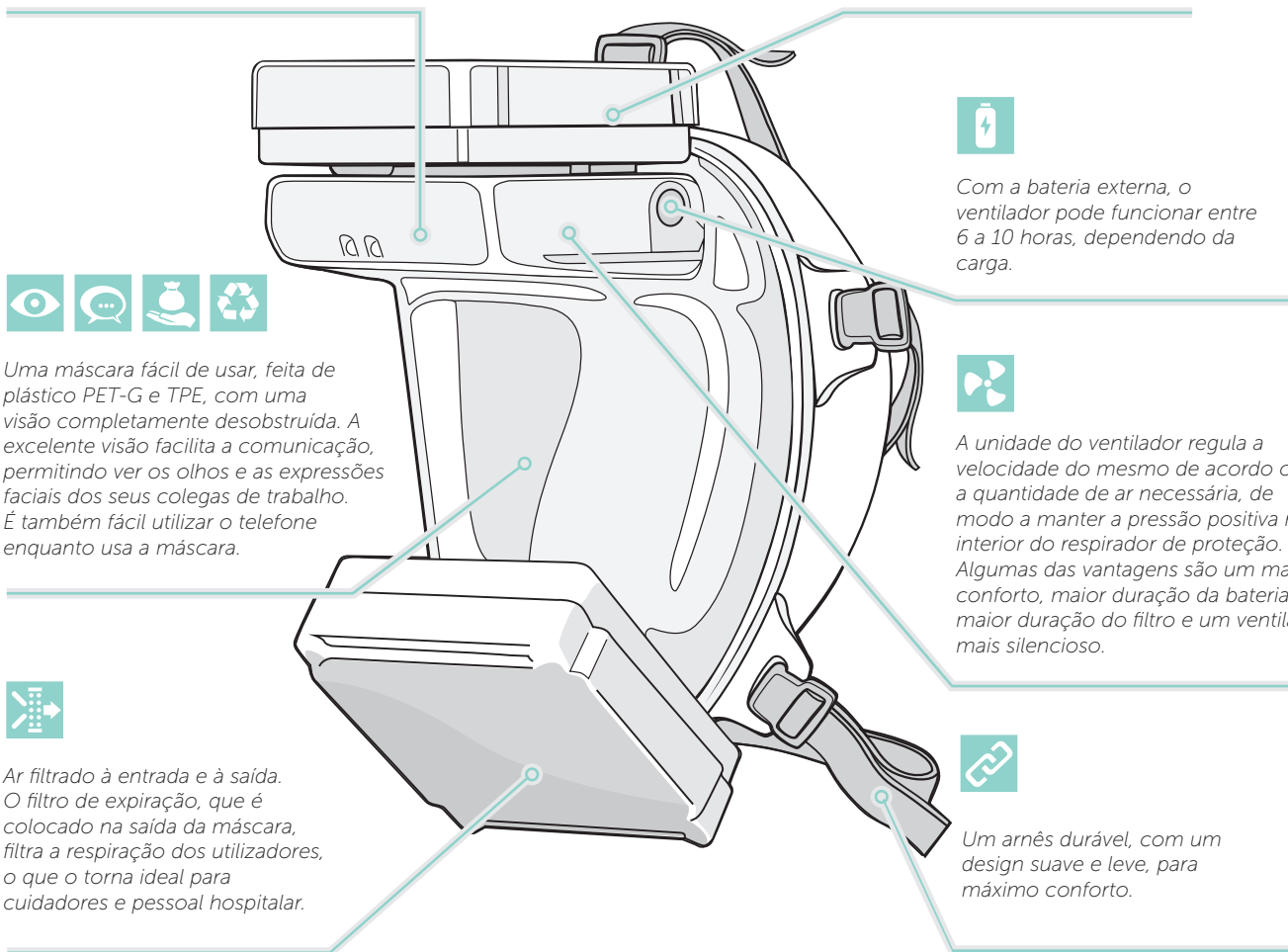

Uma máscara fácil de usar, feita de plástico PET-G e TPE, com uma visão completamente desobstruída. A excelente visão facilita a comunicação, permitindo ver os olhos e as expressões faciais dos seus colegas de trabalho. É também fácil utilizar o telefone enquanto usa a máscara.



Com a bateria externa, o ventilador pode funcionar entre 6 a 10 horas, dependendo da carga.



A unidade do ventilador regula a velocidade do mesmo de acordo com a quantidade de ar necessária, de modo a manter a pressão positiva no interior do respirador de proteção. Algumas das vantagens são um maior conforto, maior duração da bateria, maior duração do filtro e um ventilador mais silencioso.



Ar filtrado à entrada e à saída. O filtro de expiração, que é colocado na saída da máscara, filtra a respiração dos utilizadores, o que o torna ideal para cuidadores e pessoal hospitalar.



Um arnês durável, com um design suave e leve, para máximo conforto.

