

tiki
medical



Rewolucja w technologii
aparatów oddechowych

MADE IN SWEDEN

Maska jest zaprojektowana w taki sposób, aby łatwiej można było wykonywać swoją pracę.

Maska Tiki medical jest innowacyjnym ochronnym aparatem oddechowym, produkowanym w Szwecji, przeznaczonym do stosowania w wymagających warunkach, w których istnieje potrzeba ochrony przed unoszącymi się w powietrzu cząsteczkami oraz bakteriami. Maski Tiki medical zostały zaprojektowane specjalnie do użytku medycznego i dlatego jest szczególnie odpowiednia do stosowania w służbie zdrowia i ratownictwie. Maski filtruje powietrze zarówno wchodzące wnętrza maski, jak i wydostające się na zewnątrz i jest certyfikowana zgodnie z najwyższą klasą bezpieczeństwa dla sprzętu oczyszczającego ze wspomaganie przepływu powietrza (EN 12942 TM3P).

Optymalna ochrona łączy się z optymalnym komfortem

Maska Tiki została zaprojektowana z myślą o komforcie użytkownika, nawet podczas długich okresów pracy.

Dmuchała o zmiennych obrotach

Dzięki wbudowanemu w maskę czujnikowi ciśnienia, obroty dmuchawy mogą być dostosowywane do intensywności oddychania przez użytkownika, co zapewnia optymalny komfort użytkownika.

Ergonomiczne dopasowanie

Maski są dostępne w trzech różnych rozmiarach: małym, średnim i dużym – pozwala to dopasować odpowiednią maskę do wszystkich rodzajów twarzy.

Niska masa

W przeciwieństwie do wielu innych ochronnych aparatów oddechowych dostępnych na rynku, maska Tiki medical jest lekka – jej masa, w zależności od rozmiaru, wynosi od zaledwie 430-450 gramów.

Nieprześlonięta widoczność i łatwa komunikacja

Ponieważ filtr wdechowy jest umieszczony w górnej części maski, zapewnia to nieprześlonięty widok zarówno w dół, jak i na boki. Filtr wydechowy jest umieszczony przy podbródku, dzięki czemu usta są widoczne. Taka konstrukcja ułatwia zarówno komunikację wizualną, jak i werbalną. Podczas noszenia maski można widzieć na wzajem swoje twarze, a nawet rozmawiać przez telefon. Dzięki wbudowanemu systemowi oświetlenia LED, maska Tiki umożliwia pracę nawet w ciemności lub w ciasnych warunkach.

Możliwość swobodnego oddychania, niczym nieprześlonięta widoczność, a przy tym najwyższe bezpieczeństwo to tylko niektóre z licznych zalet masek Tiki medical.






Ochronny aparat oddechowy Tiki jest zasilany przez akumulator wewnętrzny o czasie pracy 1-2,5 godziny, w zależności od obciążenia. Dla osób wymagających dłuższego czasu pracy, jako akcesorium dostępny jest zespół akumulatora zewnętrznego. Maskę wyposażoną jest również w oświetlenie LED, które ułatwia pracę w ciemności.



Filtr cząstek stałych chroni przed wszystkimi rodzajami zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych (P3). Wymiana filtra i maski jest szybka i łatwa. Filtr ma kształt kwadratowy, co pozwala uzyskać maksymalną powierzchnię filtracyjną i długotrwałą żywotność.

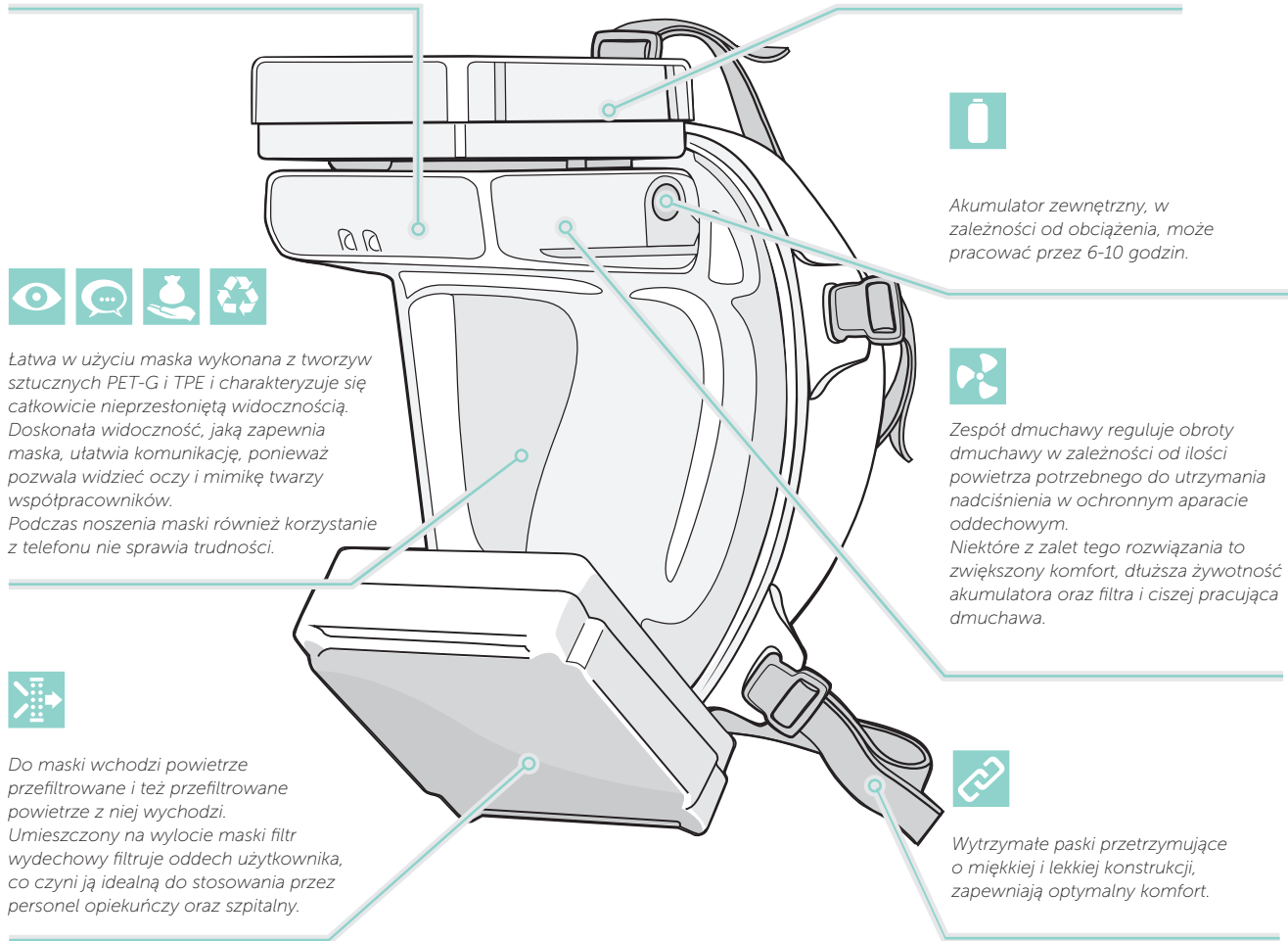

Łatwa w użyciu maska wykonana z tworzyw sztucznych PET-G i TPE i charakteryzuje się całkowicie nieprześloną widocznością. Doskonała widoczność, jaką zapewnia maska, ułatwia komunikację, ponieważ pozwala widzieć oczy i mimikę twarzy współpracowników. Podczas noszenia maski również korzystanie z telefonu nie sprawia trudności.



Akumulator zewnętrzny, w zależności od obciążenia, może pracować przez 6-10 godzin.



Zespół dmuchawy reguluje obroty dmuchawy w zależności od ilości powietrza potrzebnego do utrzymania nadciśnienia w ochronnym aparacie oddechowym. Niektóre z zalet tego rozwiązania to zwiększony komfort, dłuższa żywotność akumulatora oraz filtra i ciszej pracująca dmuchawa.



Do maski wchodzi powietrze przefiltrowane i też przefiltrowane powietrze z niej wychodzi. Umieszczony na wylocie maski filtr wydechowy filtruje oddech użytkownika, co czyni ją idealną do stosowania przez personel opiekuńczy oraz szpitalny.



Wytrzymałe paski przetrzymujące o miękkiej i lekkiej konstrukcji, zapewniają optymalny komfort.

Jak działa maska Tiki?

Maska Tiki działa poprzez zapewnienie nadciśnienia powietrza w jej wnętrzu. Nadciśnienie jest wytwarzane przez zasilaną akumulatorowo dmuchawę, która zasysa powietrze do maski poprzez filtr oczyszczający. Dzięki wbudowanemu czujnikowi wrażliwemu na ciśnienie, maska utrzymuje nadciśnienie całkowicie zgodnie z rytmem oddechu użytkownika, co w porównaniu z tradycyjnym aparatem oddechowym, zapewnia wyższy komfort użytkownika. Ten rodzaj indywidualnego dostosowania oznacza dodatkową zaletę w postaci wydłużenia żywotności zarówno akumulatora, jak i filtra. Maska ma również wbudowany system ostrzegawczy, który informuje o zbyt niskim poziomie naładowania akumulatora,

nieprawidłowym ciśnieniu w masce oraz o zapchanym lub wymagającym wymiany filtrze.


Maska łatwa w użyciu

Ochronny aparat oddechowy Tiki medical zbudowany jest z pięciu elementów składowych: Dmuchawy, filtra wdechowego (białego), filtra wydechowego (zielonego), maski oraz pasków przetrzymujących. Ochronny aparat oddechowy Tiki jest gotowy do użycia od momentu zamocowania na miejscu łatwo regulowanych pasków przetrzymujących. Filtr można w szybki i łatwy sposób wymienić bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Również sama maska, jeżeli będzie porysowana lub z innych przyczyn nie będzie nadawać się do użytku, może zostać szybko i łatwo wymieniona.



A oto dziesięć ważnych powodów, dla których warto wybrać maskę Tiki medical

- Unikatowy środek ochrony dróg oddechowych, filtrujący zarówno powietrze wlotowe jak i wylotowe
- Najwyższa klasa ochrony wg norm europejskich
- Niezwykły komfort dzięki sterowanemu za pomocą czujnika ciśnienia nawiewowi powietrza
- Niska masa: zaczynająca się już od zaledwie 430 gramów
- Zapewnienie doskonałej widoczności i komunikacji
- Długi czas pracy na akumulatorze: do dziesięciu godzin przy użyciu akumulatora zewnętrznego
- Kwadratowy filtr P3 zapewnia optymalną wydajność i długą żywotność
- Wbudowane oświetlenie LED
- Szybka i łatwa wymiana maski oraz filtra
- Optycalność ekonomiczna: niski całkowity koszt posiadania

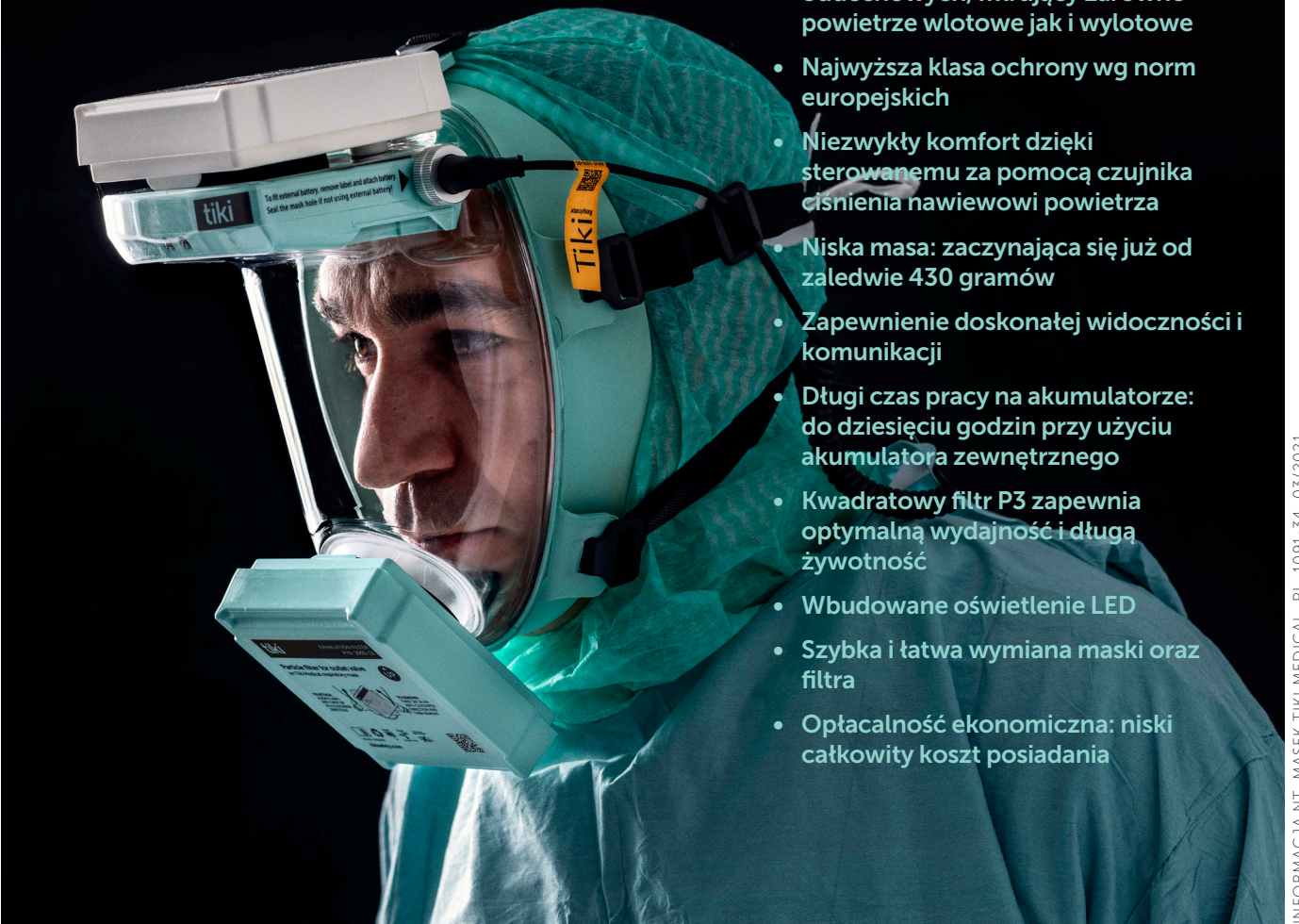

INFORMACJA NT. MASEK TIKI MEDICAL PL 1091-34 03/2021

Więcej informacji oraz faktów na temat firmy Tiki można znaleźć na stronie internetowej tikimed.com.

Prosimy pomyśl o środowisku!

Ponieważ zarówno maska jak i filtr mogą być używane ponownie, ilość odpadów, w porównaniu z produktami jednorazowymi, jest mniejsza. Ponadto maska wykonana jest z tworzyw sztucznych PET-G i TPE, które mogą być poddane recyklingowi. W produkcji wykorzystywane są wyłącznie ekologiczne źródła energii, a firma Tiki aktywnie pracuje nad ciągłym zmniejszaniem ilości odpadów w produkcji.

Maska Tiki w warunkach rzeczywistych

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej, uzyskać wycenę lub wypróbować maskę w warunkach rzeczywistych, zapraszamy do kontaktu.

Zadzwoń do nas już dziś, bądź napisz wiadomość mailową!

+46 8-353 249 (w dni robocze 8:00–17:00 GMT)
info@tikisafety.com

tiki

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-19740 40 Bro
SZWECJA

+46(0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com

CE
2797