

tiki
medical



Revoluce v technologii respirátorů

VYROBENO VE ŠVÉDSKU

Navrženo pro usnadnění vaší práce

Tiki medical je inovativní ochranný respirátor vyrobený ve Švédsku k použití v náročných prostředích, která vyžadují ochranu před částicemi a bakteriemi přenášenými vzduchem. Masky Tiki medical jsou navrženy konkrétně pro zdravotnické použití, a tedy obzvláště vhodná k použití ve zdravotnických a záchranářských službách. Masky filtrují vzduch na vstupu i na výstupu a mají certifikaci dle nejvyšší bezpečnostní třídy pro filtrační prostředky s pomocnou ventilací (EN 12942 TM3P).

Optimální ochrana při optimálním komfortu

Masky Tiki byly navrženy s důrazem na uživatelské pohodlí i při dlouhotrvající práci.

Ventilátor s nastavitelnou rychlostí

Díky čidlu citlivému na tlak zabudovanému do masky lze rychlost přizpůsobit frekvenci vašeho dechu, což je zárukou optimálního uživatelského pohodlí.

Ergonomický tvar

Maska je k dispozici ve třech různých velikostech: malá, střední a velká, takže dobře padne na všechny tvary obličejů.

Nízká hmotnost

Oproti mnoha jiným ochranným respirátorům na trhu je maska Tiki medical lehká, v závislosti na velikosti váží jen 430-450 gramů.

Volný výhled a snadná komunikace

Protože je inhalační filtr umístěn v horní části masky, vašemu výhledu směrem dolů a do stran nic nepřekáží. Výdechový filtr je umístěn u brady, takže jsou viditelná ústa. Tento design usnadňuje vizuální i verbální komunikaci. Uživatelé tak vzájemně vidí svá ústa a s nasazenou maskou můžete dokonce telefonovat. Díky zabudovanému systému LED osvětlení masky Tiki umožňuje i práci v temných nebo stísněných podmínkách.

Možnost volného dýchání, ničím nerušený výhled a maximální úroveň bezpečnosti – to je jen několik z mnoha výhod masky Tiki medical.






Ochranný respirátor Tiki je napájen interní baterií s výdrží 1 až 2,5 hodiny v závislosti na provozní zátěži. Požadujete-li delší výdrž na baterie, můžete si objednat jako příslušenství externí baterii. Masku je dále vybavena LED osvětlením, které usnadňuje práci v temných podmínkách.



Filtr částic chrání před všemi druhy částicových nečistot (P3). Výměna filtru a masky je rychlá a snadná. Filtr má čtvercový tvar pro dosažení maximální filtrační plochy a dlouhé životnosti.

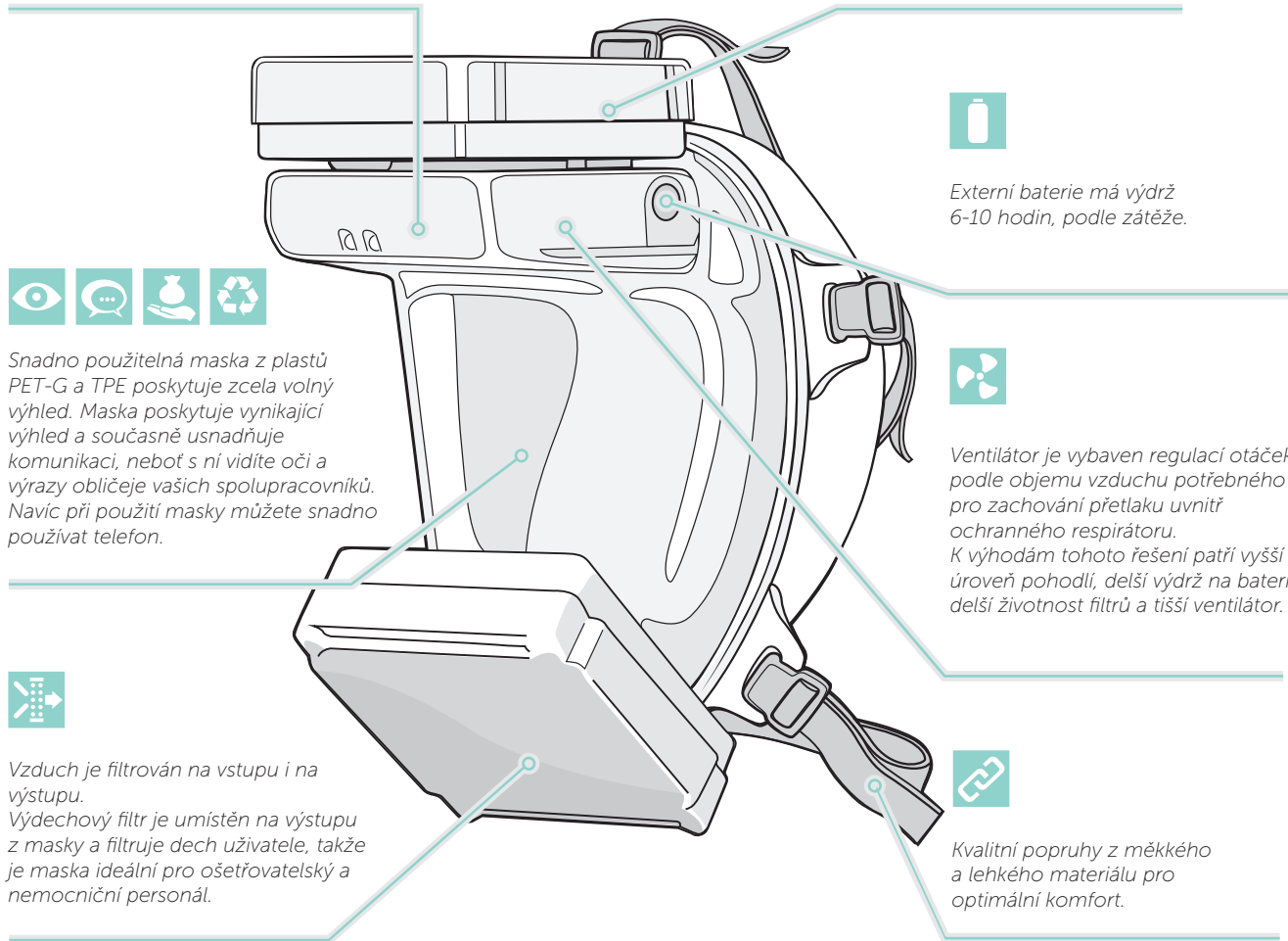

Jak maska Tiki funguje?

Maska Tiki zajišťuje přetlak uvnitř masky. Přetlak vytváří bateriově poháněný ventilátor, která nasává vzduch do masky přes čistící filtr. S pomocí zabudovaného čidla citlivého na tlak zachovává maska přetlak zcela podle tempa vašeho dýchání, což v porovnání s běžnými respirátory poskytuje vysoký komfort používání. Tato individuální adaptace má navíc výhodu v delší životnosti baterie i filtru. Maska má navíc zabudovaný systém varování, který vás upozorní na příliš nízké nabití baterie, nesprávný tlak uvnitř masky nebo v

případě, že je filtr ucpaný nebo je nutné jej vyměnit.

Snadné použití

Maska Tiki medical se skládá z pěti dílů: Ventilátor, inhalační filtr (bílý), výdechový filtr (zelený), maska a popruhy. Masku Tiki můžete začít používat ihned po upevnění jejího snadno nastavitelného postroje s popruhy. Filtr lze rychle a snadno vyměnit bez jakéhokoliv nářadí. Masku samotnou můžete rychle vyměnit, pokud například dojde k jejímu poškrábání nebo jinému znehodnocení.



Deset dobrých důvodů proč vybrat Tiki medical

- Skvělá ochrana dýchacích cest s filtrací vzduchu na vstupu i výstupu
- Vysoký stupeň ochrany dle Evropských norem
- Extrémně komfortní díky přívodu vzduchu se senzorickou regulací
- Lehká konstrukce již od 430 gramů
- Poskytuje skvělé zorné pole a komunikaci
- Dlouhá životnost baterie: až deset hodin s externí baterií
- Čtvercový filtr P3 pro optimální funkci a dlouhou životnost
- Zabudované LED osvětlení
- Rychlá a snadná výměna masky a filtru
- Hospodárnost: nízké celkové náklady vlastnictví



TIKI MEDICAL INFO CZ 1091-38 03/2021

Na stránce tikimed.com najdete další informace o výrobcích Tiki.

Pamatujte na životní prostředí

Protože masku i filtr můžete používat opakovaně, je oproti výrobkům na jedno použití snížena tvorba odpadu. Navíc je maska vyrobena z plastů PET-G a TPE a lze ji recyklovat. Při její výrobě je využívána pouze zelená energie z obnovitelných zdrojů a firma Tiki aktivně pracuje na snižování množství odpadů vznikajících při výrobě.

Reálná zkušenost s Tiki

Pokud chcete více informací, cenovou nabídku nebo si naše výrobky reálně vyzkoušet, neváhejte nás kontaktovat.

Zavolejte nám nebo napište e-mail ještě dnes!

+46 8-353 249 (v pracovní dny od 8:00 do 17:00 GMT)

info@tikisafety.com

tiki

Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
ŠVÉDSKO

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com

CE
2797