

tiki  
medical



Produits

FABRIQUÉ EN SUÈDE

# Une protection respiratoire révolutionnaire conçue pour les soins de santé

Tiki medical est l'un des produits de sécurité les plus avancés du marché, développé en Suède pour protéger le personnel travaillant dans des environnements dangereux. Le masque dispose de filtres d'inhalation et d'expiration. Il est donc adapté à une utilisation dans des opérations de soins de santé. Le souffleur

ajuste automatiquement le débit d'air à la demande de l'utilisateur, ce qui facilite la respiration, même pendant de longues périodes. Tiki est équipé de LED intégrées et est certifié pour la classe de protection la plus élevée pour les appareils de protection respiratoire à épuration d'air motorisés (PAPR), EN 12942 TM3P.


## Kit de démarrage Tiki medical




### Tiki medical

Contient toutes les pièces nécessaires pour commencer à utiliser le Tiki medical : Un masque, un harnais, deux filtres, un filtre blanc pour l'inhalation et un filtre vert pour l'expiration, un ventilateur avec batterie intégrée, un chargeur et un joint à vis. Choisissez entre trois tailles de masque: S, M ou L.

- 1200-51 TikiSTART Medical Standard Petit
- 1200-52 TikiSTART Medical Standard Moyen
- 1200-53 TikiSTART Medical Standard Grand

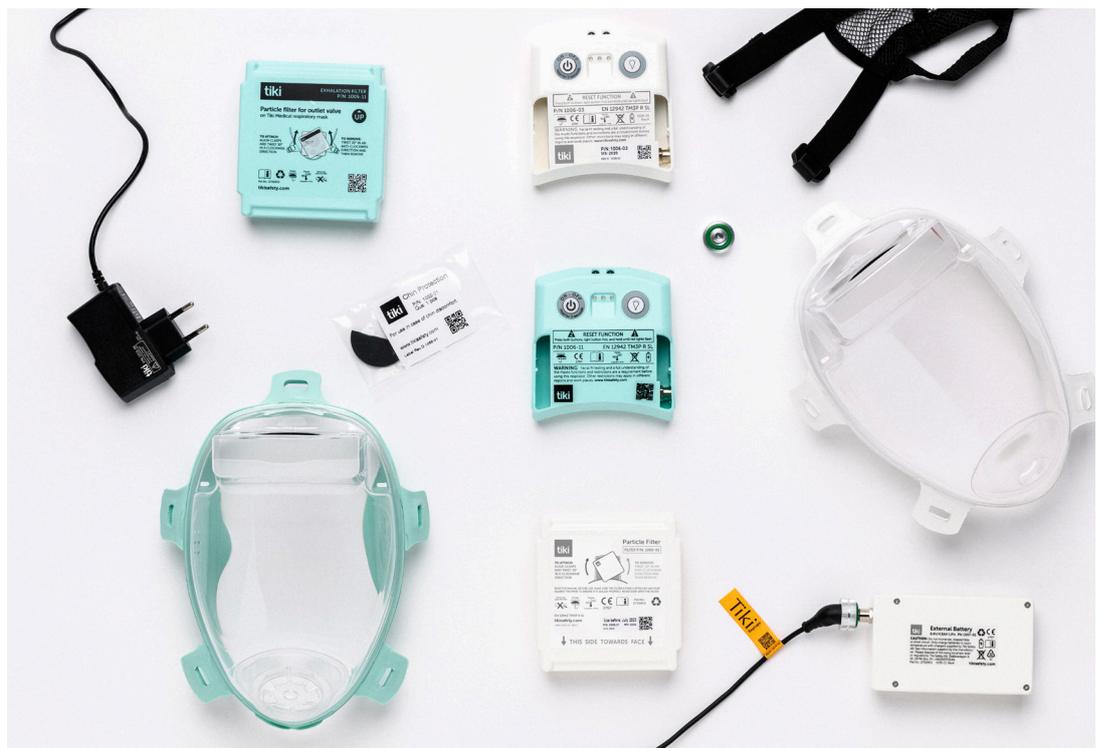


## Pièces de rechange

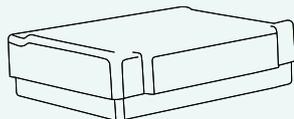


**TikiFILTER blanc pour l'inhalation**  
Filtres à particules P3 interchangeable.

1005-51 Filtres blancs P3 2 pces  
1005-52 Filtres blancs P3 120 pces  
1005-53 Filtres blancs P3 2x30 pces

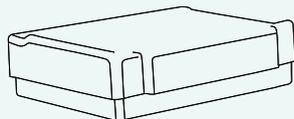

**TikiFILTER vert pour l'expiration**  
Filtres à particules P3 interchangeable.


1005-56 Filtres verts P3 2 pces  
1005-57 Filtres verts P3 120 pces

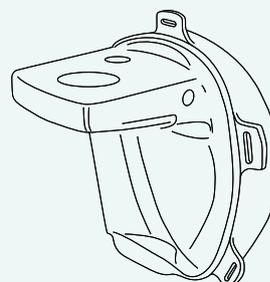


**TikiMASK Medical lot de 5**  
Masques échangeables.

1210-51 Lot de 5 masques verts S  
1210-52 Lot de 5 masques verts M  
1210-53 Lot de 5 masques verts L


## Accessoires

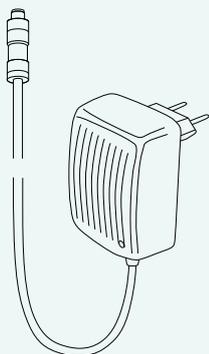


**TikiCHARGER**  
Chargeur pour prises secteur.  
1013-53 Chargeur

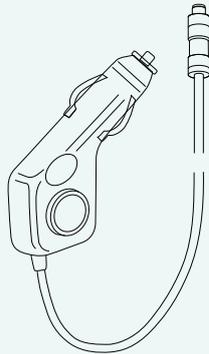


**Chargeur TikiCAR**  
Chargeur de voiture pour 12-24 V.  
1080-51 Chargeur de voiture

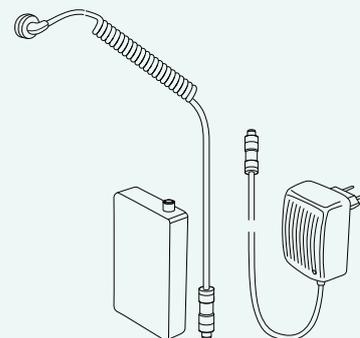


**TikiEXTERN**  
Ensemble avec batterie externe, chargeur et cordon. La batterie externe a une capacité élevée. Elle dispose également d'un clip de ceinture pour une fixation pratique.  
1007-51 Batterie externe et chargeur

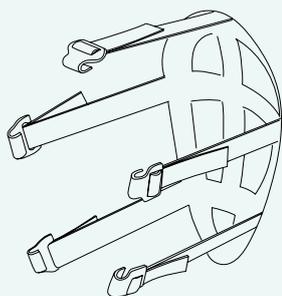

**TikiHARNESSE lot de 5**  
Harnais souple pour maintenir le masque en place.  
1012-51 Harnais lot de 5

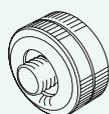

**Joint à vis**  
Étanchéifie le trou du masque sur le côté gauche, là où la batterie externe se connecte.  
1121-52 Joint à vis Tiki

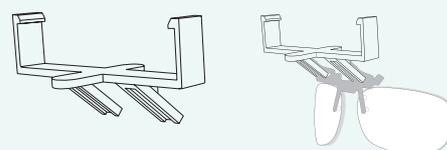


**Support pour lunettes**  
Un support pour fixer des lunettes « flip-up » à l'intérieur du masque.  
1120-51 Support pour lunettes Tiki



Le Tiki est alimenté par batterie avec une batterie interne d'une autonomie de 1 à 2,5 heures en fonction de la charge. Il existe une batterie externe plus puissante en accessoire. Le souffleur est également équipée d'éclairage à LED qui facilite le travail dans l'obscurité.

Le filtre à particules protège contre tous les types de particules polluantes (P3). Le filtre et le masque sont faciles et rapides à remplacer. Le filtre a une forme quadrangulaire afin d'obtenir une surface de filtration maximale et une longue durée de vie.

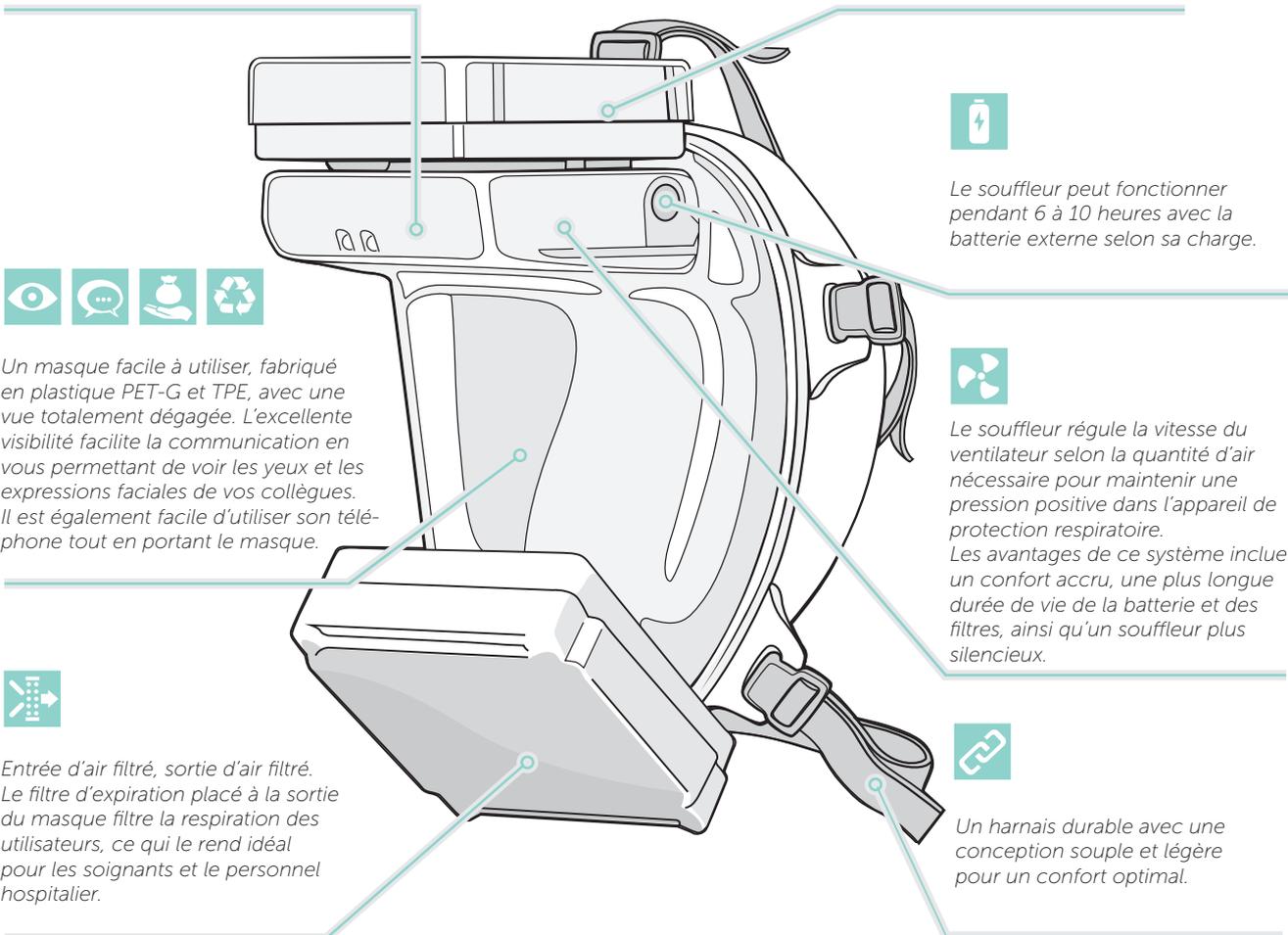

Un masque facile à utiliser, fabriqué en plastique PET-G et TPE, avec une vue totalement dégagée. L'excellente visibilité facilite la communication en vous permettant de voir les yeux et les expressions faciales de vos collègues. Il est également facile d'utiliser son téléphone tout en portant le masque.



Le souffleur peut fonctionner pendant 6 à 10 heures avec la batterie externe selon sa charge.



Le souffleur régule la vitesse du ventilateur selon la quantité d'air nécessaire pour maintenir une pression positive dans l'appareil de protection respiratoire. Les avantages de ce système incluent un confort accru, une plus longue durée de vie de la batterie et des filtres, ainsi qu'un souffleur plus silencieux.



Entrée d'air filtré, sortie d'air filtré. Le filtre d'expiration placé à la sortie du masque filtre la respiration des utilisateurs, ce qui le rend idéal pour les soignants et le personnel hospitalier.



Un harnais durable avec une conception souple et légère pour un confort optimal.

