

tiki

medical



Produkter

MADE IN SWEDEN

Et revolutionerende åndedrætsværn, designet til sundhedsområdet

Tiki medical er et af de mest avancerede sikkerhedsprodukter på markedet, og det er blevet udviklet i Sverige for at beskytte medarbejdere, der arbejder i farlige miljøer. Masken er udstyret med både ind- og udåndingsfiltre og egner sig derfor til anvendelse på sundhedsområdet. Blæseren justerer automatisk luftstrømmen

i henhold til brugerens behov, og derved bliver det nemt at trække vejret – selv i længere perioder. Tiki har indbygget LED lys og er certificeret i henhold til de strengeste beskyttelsesklasser for drevne, luftrensende åndedrætsværn (PAPR), EN 12942 TM3P.

Tiki medical startsæt



Tiki medical

Indeholder alle dele, der er påkrævet for at begynde at anvende Tiki medical:


En maske, remme, to filtre, et hvidt filter til indånding og et grønt filter til udånding, en blæser med indbygget batteri, en oplader og en skruepakning.

Vælg mellem tre maskestørrelser: S, M og L.

- 1200-51 TikiSTART Medical Small Standard
- 1200-52 TikiSTART Medical Medium Standard
- 1200-53 TikiSTART Medical Large Standard



Udskiftningsdele

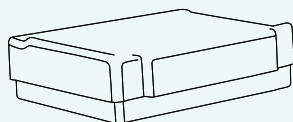


TikiFILTER , hvidt til indånding

Udskiftelige P3-partikelfiltre.

1005-51 P3, hvide filtre, 2 stk.

1005-52 P3, hvide filtre, 120 stk.

1005-53 P3, hvide filtre, 2 x 30 stk.

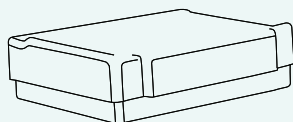


TikiFILTER grønt til udånding

Udskiftelige P3-partikelfiltre.

1005-56 P3, grønne filtre, 2 stk.

1005-57 P3, grønne filtre, 120 stk.

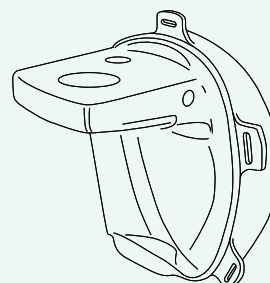

TikiMASK medical, 5 stk.


Udskiftelige masker.

1210-51 Grønne masker, 5 stk., S

1210-52 Grønne masker, 5 stk., M

1210-53 Grønne masker, 5 stk., L


Tilbehør

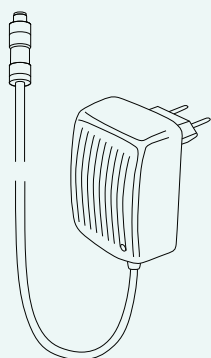

TikiCHARGER

Oplader til AC-outlets.


1013-53 Oplader

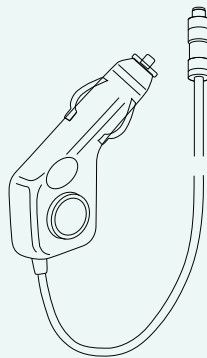

TikiCAR oplader

Oplader til bilen, 12-24V


1080-51 Oplader til bilen

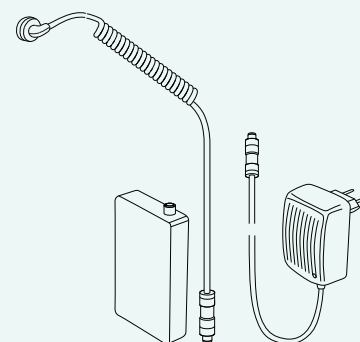

TikiEXTERN

Sæt med eksternt batteri, oplader og ledning. Det eksterne batteri har en stor kapacitet. Det er ligeledes udstyret med en bælteholder til nem påsætning.


1007-51 Eksternt batteri og oplader

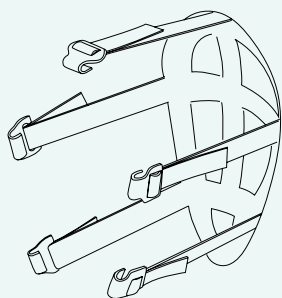

TikiHARNES 5 stk.

Bløde remme til fiksering af masken.


1012-51 Remme, 5 stk.

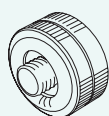

Skruepakning

Luk hullet i venstre side af masken, hvor det eksterne batteri tilsluttes.

1121-52 Tiki skruepakning

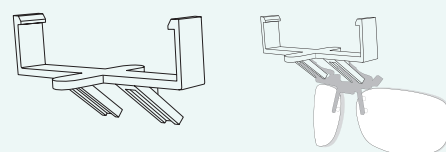

Holder til briller

En holder til påsætning af "klap-op"-briller inde i masken.


1120-51 Tiki brilleholder



Tiki er batteridrevet gennem et internt batteri, der holder i 1-2,5 timer, alt afhængigt af belastningen. Et kraftigere, eksternt batteri kan fås som tilbehør. Blæserenheden er udstyret med LED-lys, der gør det nemmere at arbejde i mørke.



Partikelfiltret beskytter mod alle typer partikelforurening (P3). Du kan hurtigt og nemt udskifte både filtret og masken. Filtret er kvadratisk for at sikre maksimal filteroverflade og en lang levetid.

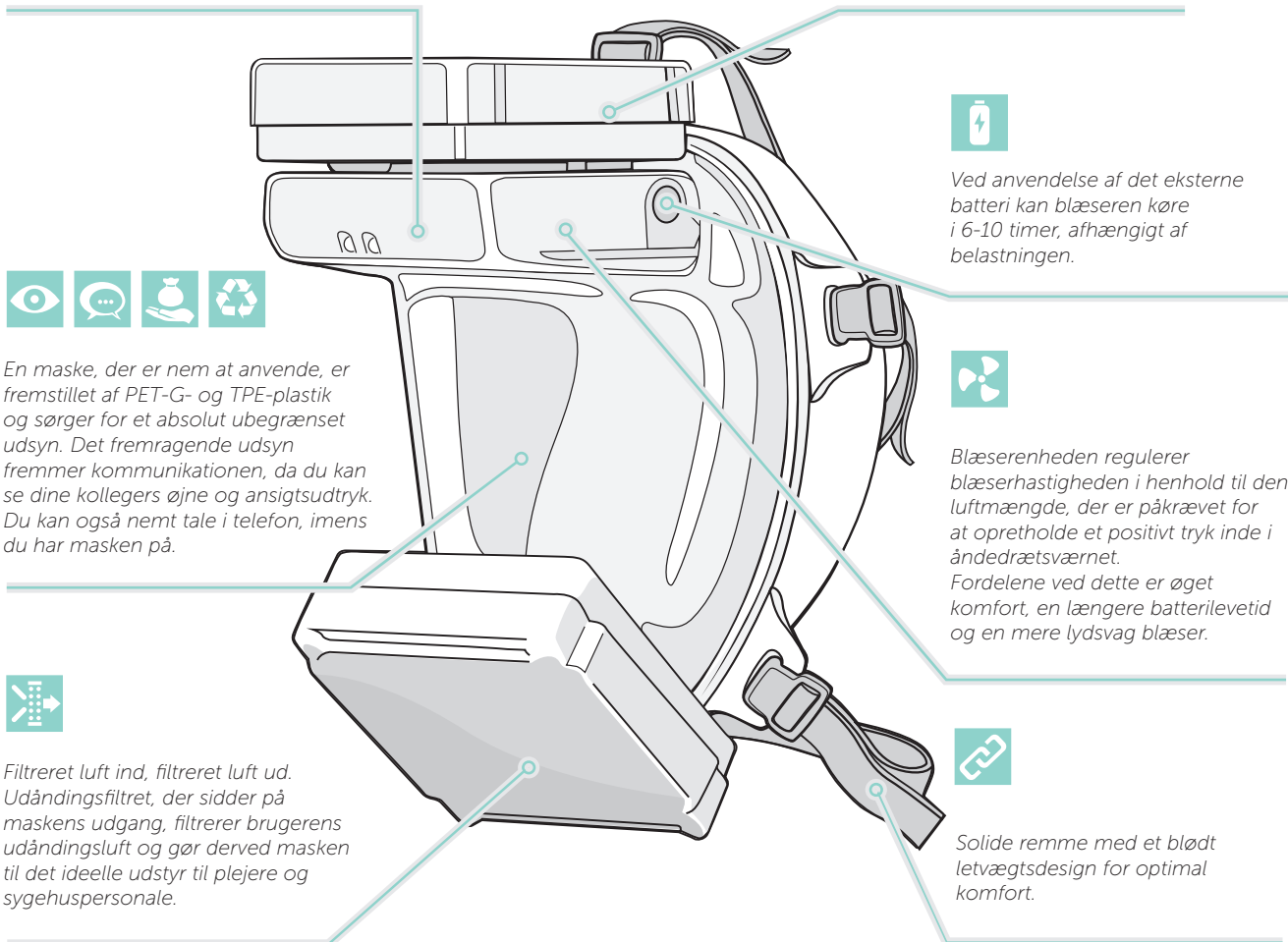

En maske, der er nem at anvende, er fremstillet af PET-G- og TPE-plastik og sørger for et absolut ubegrænset udsyn. Det fremragende udsyn fremmer kommunikationen, da du kan se dine kollegers øjne og ansigtsudtryk. Du kan også nemt tale i telefon, imens du har masken på.



Ved anvendelse af det eksterne batteri kan blæseren køre i 6-10 timer, afhængigt af belastningen.



Blæserenheden regulerer blæserhastigheden i henhold til den luftmængde, der er påkrævet for at opretholde et positivt tryk inde i åndedrætsværnet. Fordelene ved dette er øget komfort, en længere batterilevetid og en mere lydsvag blæser.



Filtreret luft ind, filtreret luft ud. Udåndingsfiltret, der sidder på maskens udgang, filtrerer brugerens udåndingsluft og gør derved masken til det ideelle udstyr til plejere og sygehuspersonale.



Solide remme med et blødt letvægtsdesign for optimal komfort.

