

tiki

medical



Produkter

MADE IN SWEDEN

Et revolusjonerende åndedrettsvern designet for helsevesenet

Tiki medical er et av de mest avansert sikkerhetsproduktene på markedet, og er utviklet i Sverige for å beskytte personell som må jobbe i farlige miljøer. Masken har både innåndings- og utåndingsfilter og egner seg derfor til bruk i helsevesenet. Vifteenheten justerer luftstrømmen

automatisk ut fra brukerens behov og gjør det lettere å puste, selv over lengre bruksperioder. Tiki har innebygde lysdioder, og er sertifisert til høyeste sikkerhetsklasse for batteridrevne luftrensende åndedrettsvern (PAPR), EN 12942 TM3P.

Tiki medical startpakke



Tiki medical

Inneholder alle deler som trengs for å bruke Tiki medical:


En maske, en sele, to filtre, et hvitt filter for innånding og et grønt filter for utånding, en vifteenhet med innebygget batteri, en lader og en skrutetning.

Du kan velge mellom tre maskestørrelser: S, M og L.

- 1200-51 TikiSTART Medical Liten Standard
- 1200-52 TikiSTART Medical Medium Standard
- 1200-53 TikiSTART Medical Stor Standard




Reservedeler

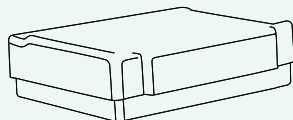

TikiFILTER hvitt for innånding

Utskiftbare P3-partikkelfiltre.


- 1005-51 P3 hvite filtre 2 stk
- 1005-52 P3 hvite filtre 120 stk
- 1005-53 P3 hvite filtre 2x30 stk

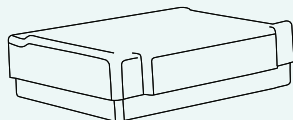

TikiFILTER grønt for utånding

Utskiftbare P3-partikkelfiltre.

- 1005-56 P3 grønne filtre 2 stk
- 1005-57 P3 grønne filtre 120 stk

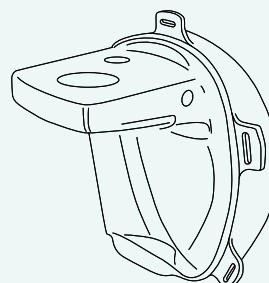


TikiMASKE Medical 5-pakning

Utskiftbare masker.

- 1210-51 5-pakning grønne masker S
- 1210-52 5-pakning grønne masker M
- 1210-53 5-pakning grønne masker L


Tilbehør

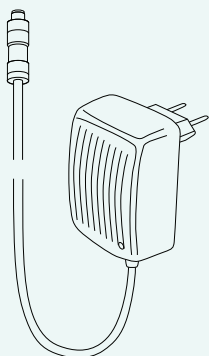

TikiLADER

Lader for vekselstrømuttak.


- 1013-53 Lader

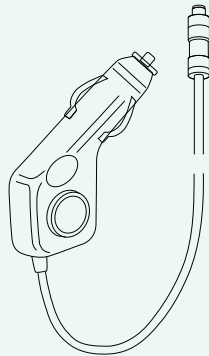

TikiBIL lader

Billader for 12–24V.


- 1080-51 Billader

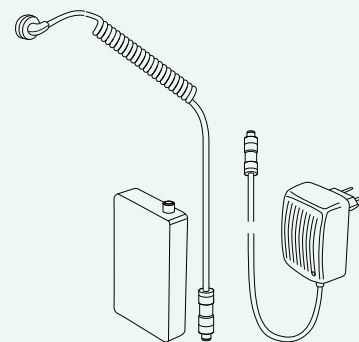

TikiEKSTERN

Sett med eksternt batteri, lader og ledning. Det eksterne batteriet har høy kapasitet. Det har også et belteklips for praktisk feste.


- 1007-51 Eksternt batteri og lader

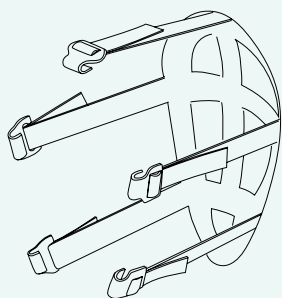

TikiSELE 5-pakning

Myk sele til å holde masken på plass.


- 1012-51 Sele 5-pakning

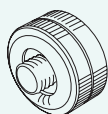

Skrutetning

Tetter hullet i masken på venstre side, der det eksterne batteriet kobles til.

- 1121-52 Tiki skrutetning

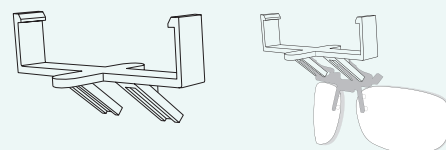

Brilleholder

For feste av «flip-up-briller» inne i masken.

- 1120-51 Tiki brilleholder



Tikien er batteridrevet og har et internt batteri som varer fra 1–2,5 arbeidstimer avhengig av belastningen. Et kraftigere eksternt batteri finnes som tilbehør. Vifteenheten er utstyrt med lysdioder som gjør det enklere å jobbe under dårlige lysforhold.



Partikkelfilteret beskytter mot alle typer luftbårne kontaminanter (P3). Det er raskt og enkelt å bytte både filteret og masken. Filterets form er kvadratisk for å oppnå en maksimal filteroverflate og en lang levetid.

