

tiki

medical



Produkty

MADE IN SWEDEN

Rewolucyjne aparaty ochrony dróg oddechowych zaprojektowane dla celów opieki medycznej

Maski Tiki medical są jednymi z najbardziej zaawansowanych produktów zabezpieczających obecnych na rynku. Opracowane zostały w Szwecji na potrzeby personelu pracującego w środowiskach niebezpiecznych. Maska wyposażona jest zarówno w filtr wdechowy jak i wydechowy i dlatego jest odpowiednia do stosowania przy zabiegach medycznych. Dmuchawa

automatycznie reguluje natężenie strumienia przepływu powietrza w zależności od zapotrzebowania użytkownika i ułatwia oddychanie nawet w dłuższych okresach czasu. Maska Tiki ma wbudowane diody LED i jest certyfikowana zgodnie z najwyższą klasą bezpieczeństwa dla sprzętu oczyszczającego ze wspomaganie przepływu powietrza (PAPR), EN 12942 TM3P.

Zestaw startowy Tiki medical




Maska Tiki medical

Zawiera wszystkie elementy niezbędne do rozpoczęcia użytkowania masek Tiki medical. Maska, paski przytrzymujące, dwa filtry, biały filtr wdechowy i zielony filtr wydechowy, dmuchawa z wbudowanym akumulatorem, ładowarka oraz uszczelka połączenia gwintowego. Można wybierać spośród masek o wymiarach: S, M i L.

- 1200-51 TikiSTART Medical Small Standard (mała)
- 1200-52 TikiSTART Medical Medium Standard (średnia)
- 1200-53 TikiSTART Medical Large Standard (duża)




Części zamienne

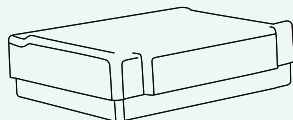

Filtry TikiFILTER białe – wdechowe

Wymienne filtry cząstek stałych P3.


- 1005-51 filtry białe P3 2 szt.
- 1005-52 filtry białe P3 120 szt.
- 1005-53 filtry białe P3 2x30 szt.

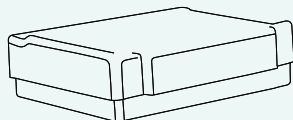

Filtry TikiFILTER zielone – wydechowe

Wymienne filtry cząstek stałych P3.

- 1005-56 filtry zielone P3 2 szt.
- 1005-57 filtry zielone P3 120 szt.

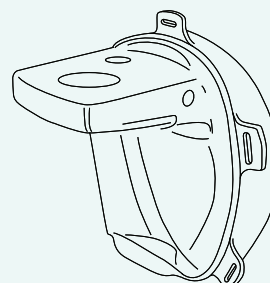


Maska TikiMASK Medical opakowanie 5 szt.

Maski na wymianę.

- 1210-51 opakowanie 5 szt. zielonych masek S
- 1210-52 opakowanie 5 szt. zielonych masek M
- 1210-53 opakowanie 5 szt. zielonych masek L


Akcesoria

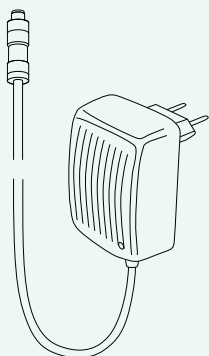

Ładowarka TikiCHARGER

Ładowarka podłączana do gniazdek prądu przemiennego (AC)


- 1013-53 Ładowarka

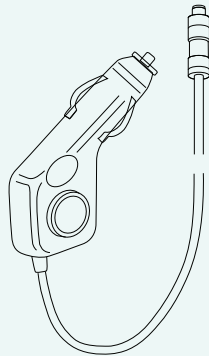

Ładowarka samochodowa TikiCAR

Ładowarka samochodowa na napięcie 12-24V


- 1080-51 Ładowarka samochodowa

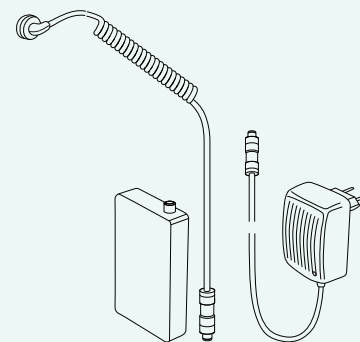

Zestaw akumulatora zewnętrznego TikiEXTERN

Zestaw z akumulatorem zewnętrznym, ładowarką oraz kablem ładowarki. Ten akumulator zewnętrzny ma wysoką pojemność. Jest wyposażony również w klamrę do dogodnego mocowania na pasku.


- 1007-51 Akumulator zewnętrzny i ładowarka

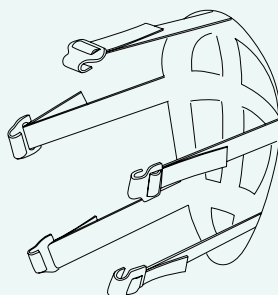

Paski przytrzymujące TikiHARNESSES opakowanie 5 szt.

Miękkie paski przytrzymujące, pozwalające utrzymać maskę na miejscu.


- 1012 -51 Paski przytrzymujące 5 szt.

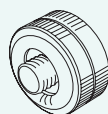

Uszczelka złącza gwintowego

Uszczelnia otwór znajdujący się w masce po lewej stronie, przeznaczony do podłączenia akumulatora zewnętrznego.

- 1121-52 Uszczelka złącza gwintowego Tiki

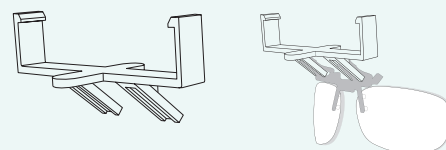

Uchwyt na okulary

Uchwyt służący do umocowania wewnątrz maski okularów typu „flip-up”.


- 1120-51 Uchwyt Tiki do mocowania okularów



Maska Tiki ma zasilanie akumulatorowe z akumulatorem wewnętrznym, który wystarcza na 1 – 2,5 godziny pracy w zależności od obciążenia. Jako wyposażenie dodatkowe dostępny jest akumulator zewnętrzny o większej pojemności. Zespół dmuchawy wyposażony jest w oświetlenie LED, które ułatwia pracę w ciemności.



Filtr cząstek stałych chroni przed wszystkimi rodzajami zanieczyszczeń w postaci cząstek stałych (P3). Wymiana zarówno filtra jak i maski jest szybka i łatwa. Filtr ma kształt kwadratowy, co pozwala uzyskać maksymalną powierzchnię filtracyjną i długotrwałą żywotność.

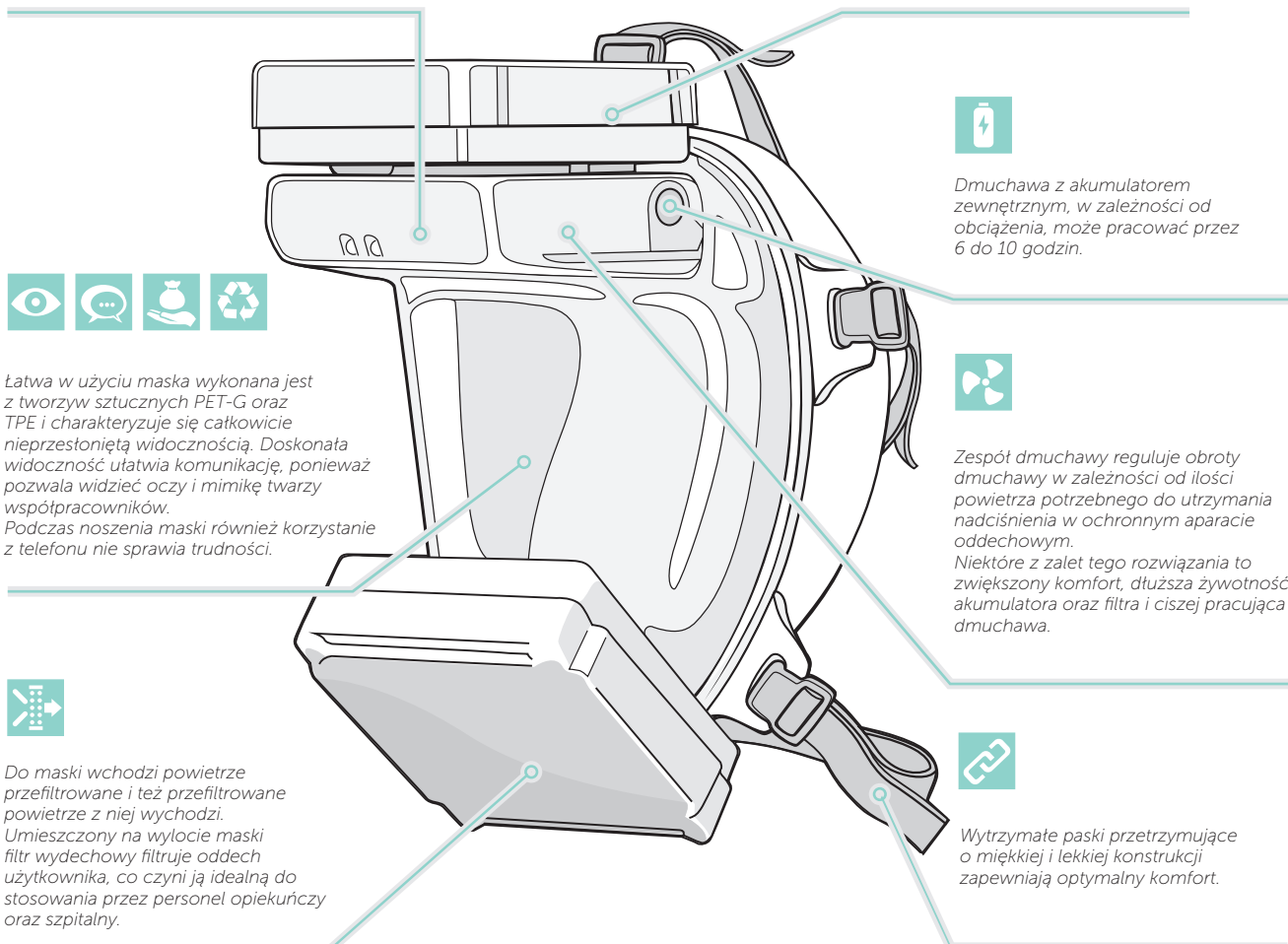

Łatwa w użyciu maska wykonana jest z tworzyw sztucznych PET-G oraz TPE i charakteryzuje się całkowicie nieprzepiętą widocznością. Doskonała widoczność ułatwia komunikację, ponieważ pozwala widzieć oczy i mimikę twarzy współpracowników. Podczas noszenia maski również korzystanie z telefonu nie sprawia trudności.



Dmuchawa z akumulatorem zewnętrznym, w zależności od obciążenia, może pracować przez 6 do 10 godzin.



Zespół dmuchawy reguluje obroty dmuchawy w zależności od ilości powietrza potrzebnego do utrzymania nadciśnienia w ochronnym aparacie oddechowym. Niektóre z zalet tego rozwiązania to zwiększony komfort, dłuższa żywotność akumulatora oraz filtra i ciszej pracująca dmuchawa.



Do maski wchodzi powietrze przepiętrowane i też przepiętrowane powietrze z niej wychodzi. Umieszczony na wylocie maski filtr wydechowy filtruje oddech użytkownika, co czyni ją idealną do stosowania przez personel opiekuńczy oraz szpitalny.



Wytrzymałe paski przetrzymujące o miękkiej i lekkiej konstrukcji zapewniają optymalny komfort.

