

tiki
medical



Výrobky

MADE IN SWEDEN

Revoluční respirační ochrana navržená pro obor zdravotnictví

Tiki medical je jedním z nejvyspělejších výrobků na trhu, vyráběný ve Švédsku pro ochranu osob pracujících v nebezpečných prostředích. Masku má inhalační i výdechový filtr, takže je vhodná pro použití ve zdravotnických profesích. Ventilátor automaticky upravuje průtok vzduchu

podle potřeb uživatele, takže se mu dýchá snadno i po delší dobu užívání. Masku má zabudované LED diody a má certifikaci dle nejvyšší třídy ochrany pro filtrační prostředky s pomocnou ventilací (PAPR) EN 12942 TM3P.

Startovací sada Tiki medical



Tiki medical


Obsahuje všechny díly potřebné pro zahájení používání masky Tiki medical: Masku, popruhy, dva filtry, bílý inhalační filtr a zelený výdechový filtr, ventilátor se zabudovanou baterií, nabíječku a šroubovací těsnění.

Vyberte si ze tří velikostí masky: S, M nebo L.

- 1200-51 TikiSTART Medical malá standardní
- 1200-52 TikiSTART Medical střední standardní
- 1200-53 TikiSTART Medical velká standardní




Náhradní díly

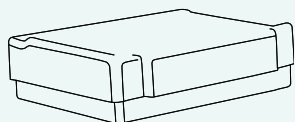

TikiFILTER bílý inhalační

Výměnné filtry částic P3.


- 1005-51 Bílé filtry P3 2 ks
- 1005-52 Bílé filtry P3 120 ks
- 1005-53 Bílé filtry P3 2 x 30 ks

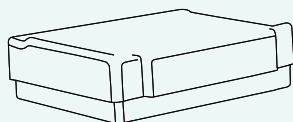

TikiFILTER zelený výdechový

Výměnné filtry částic P3.

- 1005-56 Zelené filtry P3 2 ks
- 1005-57 Zelené filtry P3 120 ks

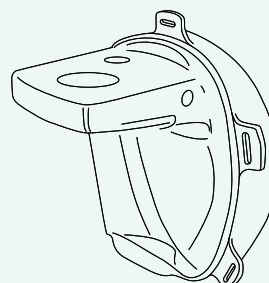


TikiMASK Medical balení 5 ks

Výměnné masky.

- 1210-51 Zelené masky balení 5 kusů S
- 1210-52 Zelené masky balení 5 kusů M
- 1210-53 Zelené masky balení 5 kusů L


Příslušenství

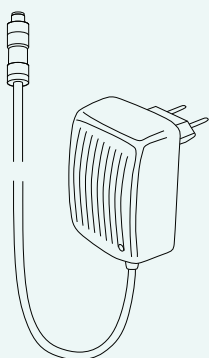

TikiCHARGER

Nabíječka pro AC zásuvky.


- 1013-53 Nabíječka

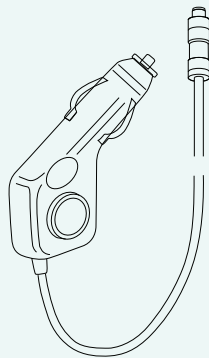

TikiCAR nabíječka

Nabíječka do auta pro 12-24 V.


- 1080-51 Nabíječka do auta

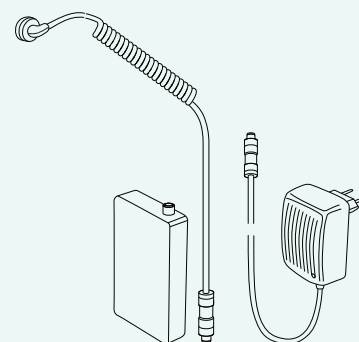

TikiEXTERN

Sada s externí baterií, nabíječkou a kabelem. Externí baterie má vysokou kapacitu. Navíc je vybavena sponou pro praktické připnutí.


- 1007-51 Externí baterie a nabíječka

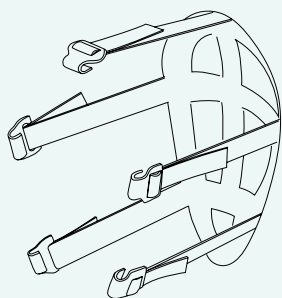

TikiHARNESS balení 5 ks

Měkké popruhy pro stabilní upnutí masky.


- 1012-51 Popruhy balení 5 kusů

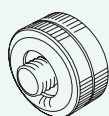

Šroubovací těsnění

Těsnění do otvoru na levé straně masky pro připojení externí baterie.

- 1121-52 Šroubovací těsnění Tiki

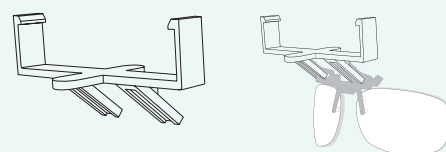

Držák na brýle

Držák pro připnutí odklápěcích („flip-up“) brýlí uvnitř masky.


- 1120-51 Držák na brýle Tiki



Respirátor Tiki je napájený baterií, a to interní baterií s výdrží 1-2,5 hodiny podle provozní zátěže. Jako příslušenství je k dispozici externí baterie s větší kapacitou. Ventilátor je dále vybaven LED osvětlením, které usnadňuje práci v temných podmínkách.



Filtr částic chrání před všemi druhy částicových nečistot (P3). Výměna filtru i masky je rychlá a snadná. Filtr má čtvercový tvar pro dosažení maximální filtrační plochy a dlouhé životnosti.

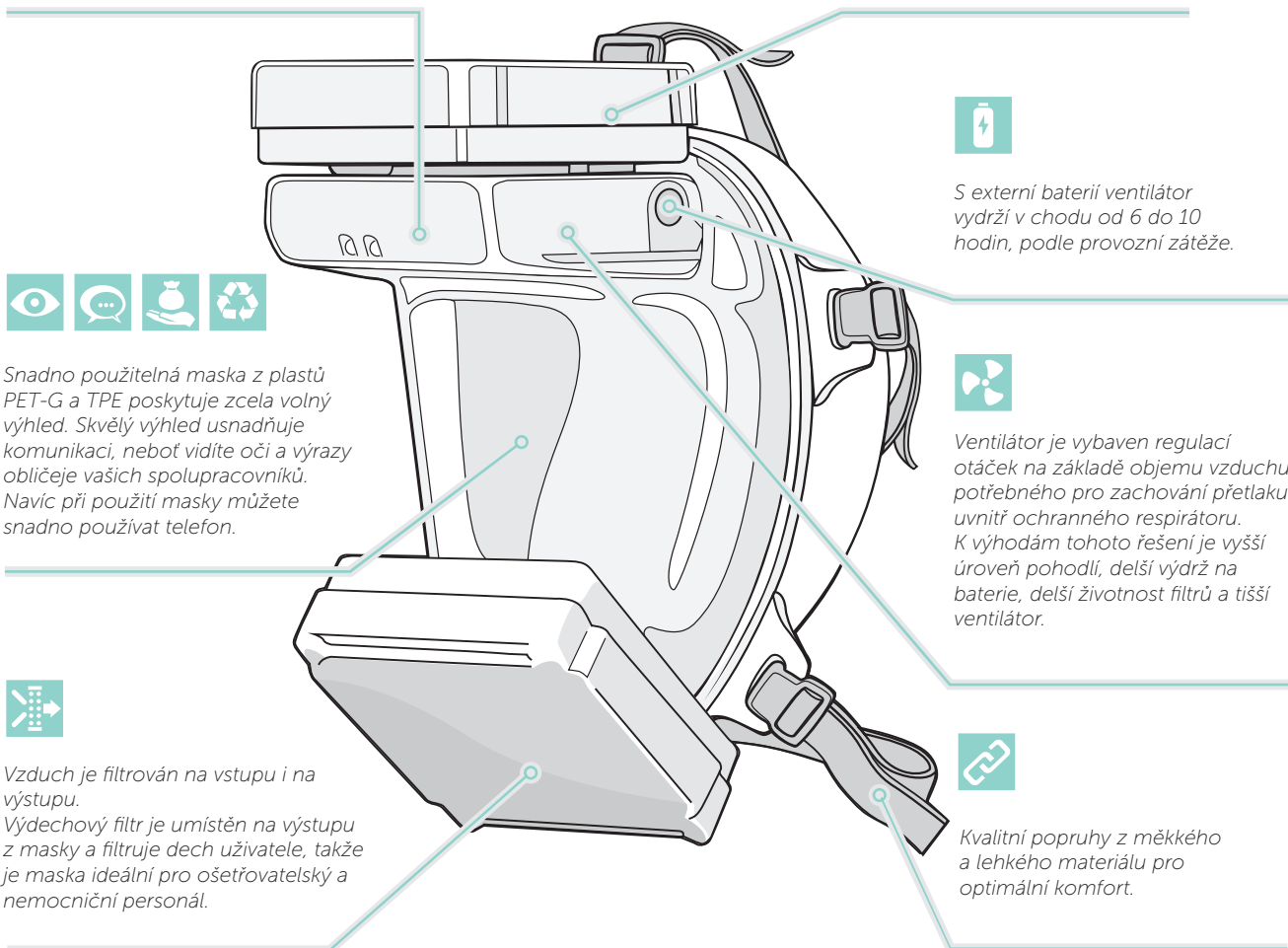

Snadno použitelná maska z plastů PET-G a TPE poskytuje zcela volný výhled. Skvělý výhled usnadňuje komunikaci, neboť vidíte oči a výrazy obličeje vašich spolupracovníků. Navíc při použití masky můžete snadno používat telefon.



S externí baterií ventilátor vydrží v chodu od 6 do 10 hodin, podle provozní zátěže.



Ventilátor je vybaven regulací otáček na základě objemu vzduchu potřebného pro zachování přetlaku uvnitř ochranného respirátoru. K výhodám tohoto řešení je vyšší úroveň pohodlí, delší výdrž na baterie, delší životnost filtrů a tišší ventilátor.



Vzduch je filtrován na vstupu i na výstupu. Výdechový filtr je umístěn na výstupu z masky a filtruje dech uživatele, takže je maska ideální pro ošetrovatelský a nemocniční personál.



Kvalitní popruhy z měkkého a lehkého materiálu pro optimální komfort.