




Tiki medical – et revolutionerende åndedrætsværn

Tiki medical er designet specielt til brug på det medicinske område og tilbyder et højt niveau af komfort og sikkerhed. Det er et af de mest avancerede sikkerhedsprodukter på markedet, men samtidig er det et af de nemmeste produkter at anvende for brugeren. Masken, som er udstyret med både ind- og udåndingsfiltre, er fuldautomatisk og justerer luftstrømmen i henhold til brugerens behov. Tiki medical har indbygget lys og er certificeret i henhold til den strengeste beskyttelsesklasse for drevne, luftrensende åndedrætsværn (PAPR), EN 12942 TM3P.

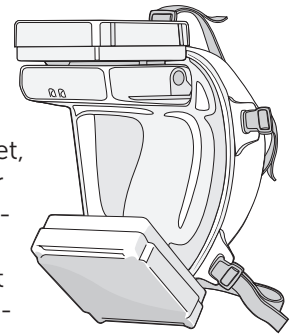

DREVET, LUFTRENSENDE
ÅNDEDRÆTSVÆRN (PAPR)

Beskyttelsescertifikater	EN 12942, kategori TM3P, APF 40, NPF
Batteriets levetid	Internt batteri – op til 2,5 timer Eksternt batteri – op til 10 timer
Opladningsvarighed	Internt batteri – ca. 1 time Eksternt batteri – ca. 2,5 timer
Batteritype og -levetid	LiPo-batteri med en levetid på ca. 1.000 opladningscyklusser (ca. 20 % kapacitetstab efter 1.000 cyklusser)
Arbejdstemperatur	-10 til +50°C
Trykfølsomhed	< 0,2 mB
Batteriadvarelsvarighed	> 15 min (ved normale forhold)
Batteriadvarelsalarm	En blinkende, rød LED og bip-lyde hvert 5. sekund
Minimum mængde af fritstrømmende luft	200 l/min
Minimum fristrømning i filter	100 l/min
Trykdølser	≤ 2 mbar
Trykalarm	To blinkende, røde LEDer og bip-lyde hvert sekund
Batteriopladningsspecifikation	Input 100-240V AC, output 0,7A
Maskevægt og -materiale	Small 92g, medium 102g, large 112g, PET-G, TPE
Blæservægt og -materiale	165g, ABS, elektronik og LiPo-batteri
Filtrevægt og -materiale	70g, ABS-plastik og HEPA-fiberglas
Remvægt og -materiale	33g, bomuld og elasthan
Det eksterne batteris vægt	200g
Batterikabelvægt	48g
Samlet vægt (minus det eksterne batteri)	Small 430g, medium 440g, large 450g
Kalibrering	Elektronisk kalibrering ved at trykke to knapper ned i 5 sekunder, intet eksternt udstyr påkrævet
Opbevaringsforhold	Langvarig opbevaring (> 6 måneder): 17°C til 28°C ved < 60% RH Mellemlang opbevaring (1-6 måneder): 0°C til 38°C Kortvarig opbevaring (< 1 måned): -20°C til 40°C ved < 30% RH
Garanti	12 måneder eller 2.000 driftstimer på ventilatorenheden ved forevisning af kvittering. Se manual for information om fuld garanti.
Patentnr.	D755953