

tiki
medical



Respiratorių technologijos revoliucija

PAGAMINTA ŠVEDIJOJE



Sukurtas Jūsų darbui palengvinti

„Tiki medical“ yra novatoriškas apsauginis respiratorius, pagamintas Švedijoje, skirtas užterštoje aplinkoje esančiam vartotojui apsaugoti nuo ore esančių dalelių ir bakterijų. „Tiki medical“ yra sukurtas specialiai medicininiam naudojimui, todėl ypač tinkamas naudoti sveikatos ir skubios pagalbos tarnybose. Kaukė filtruoja tiek į vidų patenkantį, tiek į išorę išeinantį orą ir yra sertifikuota pagal aukščiausią oro valymo respiratorių saugos klasę (EN 12942 TM3P).

Optimali apsauga ir optimalus komfortas

„Tiki“ dizainas sukurtas taip, kad vartotojui kaukė būtų patogiai net naudoti ilgą laiką.

Ventiliatorius su kintamu greičiu

Dėl kaukėje įmontuoto slėgiui jautraus jutiklio ventiliatoriaus greitį galima pritaikyti pagal vartotojo kvėpavimą, o tai užtikrina daugiausia komforto.

Ergonomiškas pritaikymas

Galima pasirinkti trijų skirtingų dydžių kaukes: mažą, vidutinę ir didelę – tinka įvairiausių formų veidams.

Lengvas

Kitaip nei daugelis rinkoje esančių apsauginių respiratorių, „Tiki medical“ yra lengva kaukė, jos svoris svyruoja vos nuo 430–450 gramų pagal dydį.

Gerai matyti ir lengva bendrauti

Kadangi įkvėpimo filtras dedamas į viršutinę kaukės dalį, neužstos tiek apačioje, tiek šonuose matomo vaizdo. Iškvėpimo filtras dedamas po smakru, todėl burna yra matoma. Šis dizainas lengvina tiek vaizdinį, tiek žodinį bendravimą. Jūs ir kiti asmenys gali matyti vienas kito veidus bei kalbėti telefonu net tada, kai dėvite kaukę. Kartu įmontuota LED apšvietimo sistema „Tiki“ leidžia dirbti net tamsiomis ar ankštomis sąlygomis.

Galimybė laisvai kvėpuoti, gerai matyti vaizdą ir būti labai saugiam – tai tik keli „Tiki medical“ privalumai.






Apsauginį respiratorių „Tiki“ maitina vidinė baterija, kuri gali veikti 1–2,5 valandos pagal apkrovą. Išorinę bateriją galima įsigyti kaip papildomą priedą, jei reikalinga, kad baterija ilgiau veiktų. Kaukėje taip pat yra LED lempučių, dėl kurių lengviau dirbti tamsoje.



Dalelių filtras apsaugo nuo visų dalelių teršalų (P3). Filtrą ir kaukę pakeisti galite greitai ir lengvai. Filtras yra kvadrato formos, kad maksimaliai būtų išnaudotas paviršius plotas ir ilgiau tarnautų.

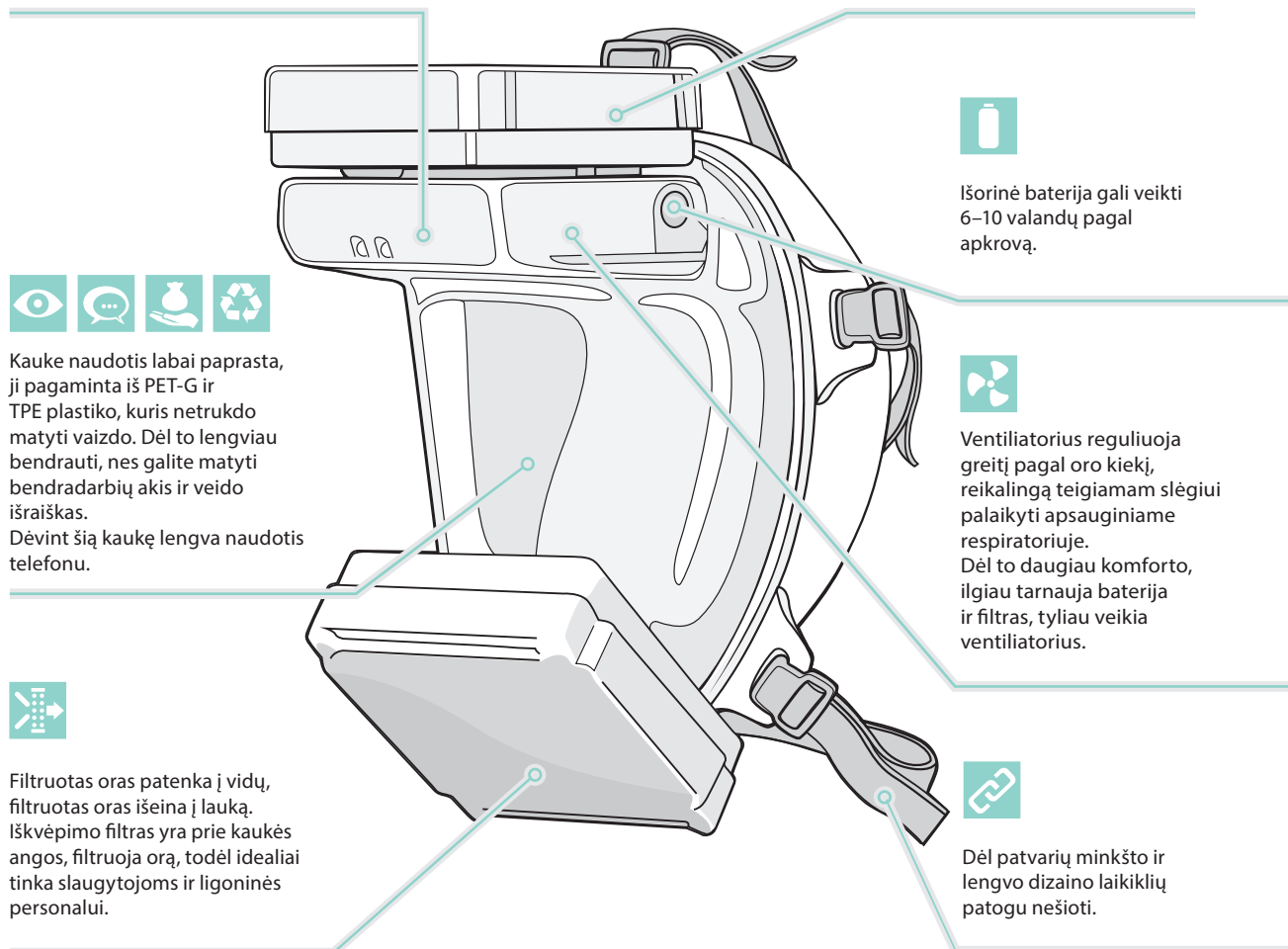

Kaukę naudoti labai paprasta, ji pagaminta iš PET-G ir TPE plastiko, kuris netrukdo matyti vaizdą. Dėl to lengviau bendrauti, nes galite matyti bendradarbių akis ir veido išraiškas. Dėvint šią kaukę lengva naudoti telefonu.



Filtruotas oras patenka į vidų, filtruotas oras išeina į lauką. Iškvėpimo filtras yra prie kaukės angos, filtruoja orą, todėl idealiai tinka slaugytojoms ir ligoninės personalui.



Išorinė baterija gali veikti 6–10 valandų pagal apkrovą.



Ventiliatorius reguliuoja greitį pagal oro kiekį, reikalingą teigiamam slėgiui palaikyti apsauginiame respiratoriuje. Dėl to daugiau komforto, ilgiau tarnauja baterija ir filtras, tyliau veikia ventiliatorius.



Dėl patvarių minkšto ir lengvo dizaino laikiklių patogiu nešioti.

Kaip veikia „Tiki“?

„Tiki“ užtikrina teigiamą slėgį kaukėje. Teigiamą slėgį sukuria baterijomis valdomas ventiliatorius, kuris siurbia orą į kaukę per valymo filtrą. Įmontuotas jautrus jutiklis išlaiko teigiamą slėgį pagal kvėpavimą, o tai suteikia daugiau komforto, palyginti su tradiciniu respiratoriumi. Dėl individualus pritaikymo ilgėja baterijos ir filtro tarnavimo laikas. Į kaukę taip pat yra įmontuota įspėjimo sistema, leidžianti sužinoti, ar: baterijai pakanka energijos; tinkamas slėgis; filtras užsikimšęs; jį reikia keisti.

Lengva naudoti

„Tiki medical“ sudaro penki komponentai: Ventiliatorius, įkvėpimo filtras (baltas), iškvėpimo filtras (žalias), kaukę ir laikikliai. „Tiki“ paruoštas naudoti nuo to momento, kai pritvirtinsite lengvai reguliuojamus laikiklius. Filtrą galima greitai ir lengvai pakeisti be papildomų įrankių. Pačią kaukę taip pat galima greitai ir lengvai pakeisti, kai subraižoma ar tampa netinkama naudoti dėl kitų priežasčių.



Dešimt svarių priežasčių, kodėl verta pasirinkti „Tiki medical“

- Unikali kvėpavimo takų apsauga filtruoja tiek į vidų patenkančią, tiek į išorę išleidžiamą orą
- Aukščiausia apsaugos klasė pagal Europos standartus
- Itin patogi kaukė dėl jutikliu valdomo oro tiekimo
- Lengva: sveria tik nuo 430 gramų
- Užtikrina puikų matomumą ir bendravimo galimybes
- Ilgas baterijos veikimo laikas: iki dešimties valandų naudojant išorinę bateriją
- Kvadratinis P3 filtras užtikrina optimalų našumą ir ilgaamžiškumą
- Įmontuotas LED apšvietimas
- Kaukę ir filtrą pakeisti greita ir lengva
- Ekonomiška: mažos bendros produkto priežiūros išlaidos

„TIKI MEDICAL“ INFORMACIJA EN 1091-21 02/2021

Tinklapyje tikimed.com rasite daugiau informacijos ir faktų apie „Tiki“.

Pagalvokite apie aplinką

Kadangi kaukę ir filtrą galima naudoti daug kartų, lieka mažiau atliekų, palyginti su vienkartiniais produktais. Be to, kaukė pagaminta iš PET-G ir TPE plastikų, taigi gali būti perdirbama. Gamyboje naudojama tik ekologiška energija iš tvarių šaltinių, o „Tiki“ nuolat aktyviai mažina gamybos atliekų kiekį.

„Tiki“ nejuokauja

Nedvejodami susisiekiame su mumis, jei norite sužinoti daugiau apie produktą, kainą arba išbandyti šį gaminį.

Skambinkite mums arba parašykite laišką dar šiandien!

+46 8-353 249 (darbo dienomis 8.00–17.00 GMT)
info@tikisafety.com

tiki

„Tiki Safety AB“
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
SWEDEN

+46 (0)8 353 249
info@tikisafety.com
tikimed.com

CE
2797

