



Tooted

Revolutsiooniline hingamisteede kaitse, mis on mõeldud tervishoius kasutamiseks

Tiki meditsiiniline mask on üks kõige täiuslikumaid turul kättesaadavaid ohutustooteid, mis on välja töötatud Rootsis ohtlikes keskkondades tegutsevate töötajate kaitsmiseks. Maskil on nii sisse- kui väljahingamisfilter ja seetõttu sobib see kasutamiseks tervishoiutoimingutes. Puhur reguleerib

õhuvoolu automaatselt vastavalt kasutaja nõudmistele, võimaldades hõlpsasti hingata ka pikema ajavahemiku jooksul. Tikil on sisseehitatud valgusdioodid ja see on sertifitseeritud kui kõrgeima kaitseklassiga õhupuhasitiga respiraator (*powered air purifying respirator, PAPR*) vastavalt standardile EN 12942 TM3P.

Tiki meditsiinilise maski stardikomplekt



Tiki meditsiiniline mask


Sisaldab kõiki osi, mis on vajalikud Tiki meditsiinilise maski kasutamiseks: mask, kinnitusrihmad, kaks filtrit – valge filter sissehingamiseks ja roheline väljahingamiseks, sisseehitatud akuga puhur, laadija ja kruvitihend.

Valige kolme maskisuuruse vahel: S, M või L.


1200-51 TikiSTART meditsiiniline mask, väike standard

1200-52 TikiSTART meditsiiniline mask, keskmine standard

1200-53 TikiSTART meditsiiniline mask, suur standard

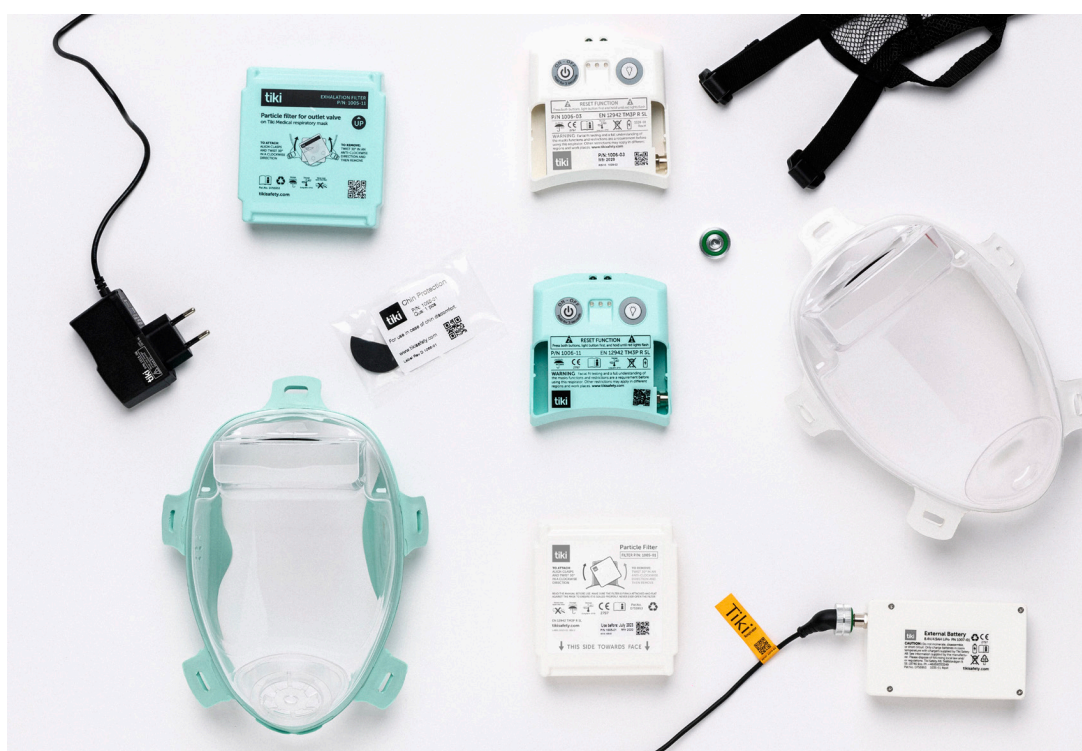


Varuosad

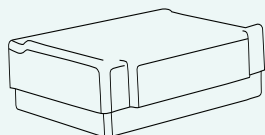


TikiFILTER valge sissehingamiseks
Vahetatavad P3-osakeste filtrid

- 1005-51 P3-osakeste valged filtrid, 2 tk
1005-52 P3-osakeste valged filtrid, 120 tk
1005-53 P3-osakeste valged filtrid, 2 x 30 tk

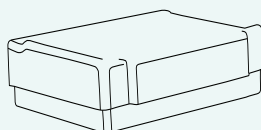

TikiFILTER roheline väljahingamiseks
Vahetatavad P3-osakeste filtrid


- 1005-56 P3-osakeste rohelised filtrid, 2 tk
1005-57 P3-osakeste rohelised filtrid, 120 tk

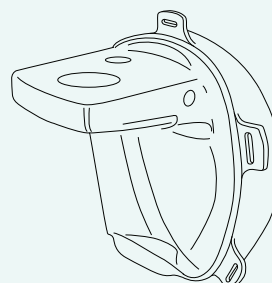

TikiMASK meditsiiniline, 5-pakk
Vahetatavad maskid


- 1210-51 rohelised maskid, 5-pakk S
1210-52 rohelised maskid, 5-pakk M
1210-53 rohelised maskid, 5-pakk L

Tarvikud

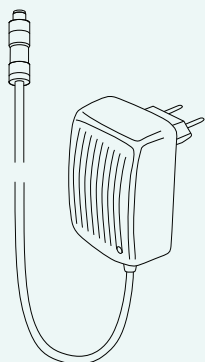


TikiCHARGER

Vahelduvvoolu pistikupesade laadija
1013-53 Laadija

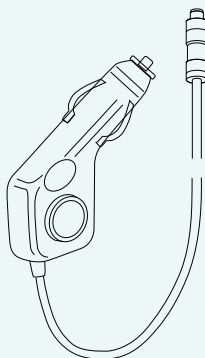

TikiCARI laadija


Autolaadija 12–24 V
1080-51 Autolaadija

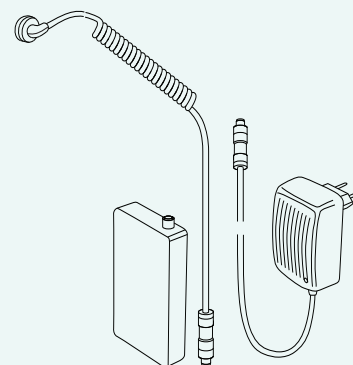

TikiEXTERN

Komplekt koos välise aku, laadija ja juhtmega. Väline aku on suure mahuga. Sellega on mugavaks kinnitamiseks ka vööklamber.


1007-51 Väline aku ja laadija

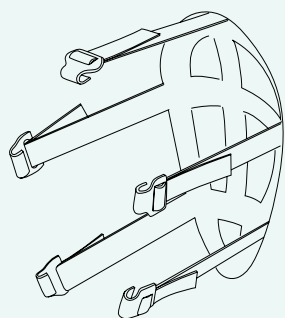

TikiHARNES, 5-pakk

Pehmed kinnitusrihmad maski paigalhoidmiseks


1012-51 Kinnitusrihmad, 5-pakk

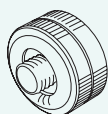

Kruvitihend

Vasakpoolsel küljel oleva maski augu tihendamiseks, kuhu ühendatakse väline aku

1121-52 Tiki kruvitihend

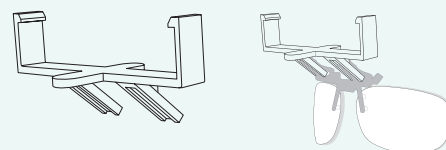

Prillihoidik


Hoidik prilliklappide kinnitamiseks maski sees.

1120-51 Tiki prillihoidik



Tiki töötab sisemise akuga, mis kestab olenevalt koormusest 1–2,5 tundi. Lisavarustusena on olemas võimsam väline aku. Puhuriüksus on varustatud LED-tuledega, mis hõlbustavad tööd pimedas.

Osakeste filter kaitseb igat liiki tahket saasteainete eest (P3). Nii filtri kui ka maski vahetamine on kiire ja lihtne. Filter on maksimaalse filtripinna ja pika tööea saavutamiseks ruudukujuline.

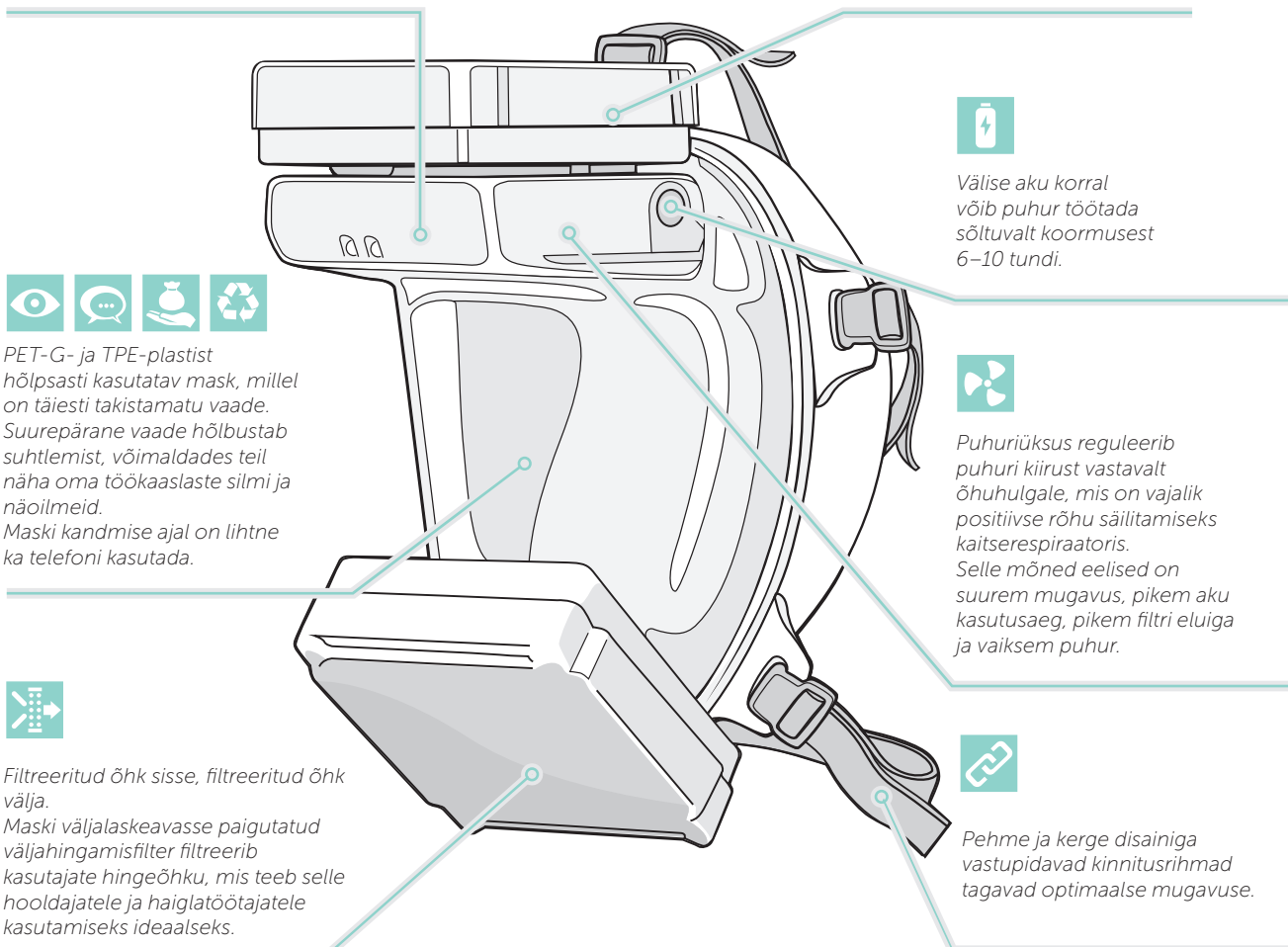

TIKI MEDITSIINI TOOTED EN 1091-41 03/2021



Tiki Safety AB
Skällstavägen 9
SE-19740 Bro
SWEDEN

+46 (0)835 3249
info@tikisafety.com
tikimed.com

