




Tiki medical – revolucionāra elpošanas aizsardzība aprīkojums.

Tiki medical ir paredzēts īpaši medicīniskai lietošanai, ar augstu komfortu un drošību.

Tas ir viens no vismodernākajiem drošības produktiem tirgū, taču lietotājam tas ir viens no vienkāršāk lietojamajiem. Maska ar gan inhalācijas, gan izelpas filtru ir pilnībā automātiska un pielāgo gaisa plūsmu pēc lietotāja nepieciešamības, Tiki ir iebūvēts apgaismojums un tā ir sertificēta augstākajai gaisa attīrīšanas respiratoru (PAPR) aizsardzības klasei, EN 12942 TM3P.

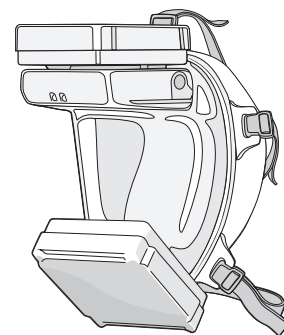

GAISU ATTĪROŠS RESPIRATORS
(POWERED AIR PURIFYING
RESPIRATOR – PAPR)

Aizsardzības sertifikāti	EN 12942 Klase TM3P, APF 40, NPF
Bateriju kalpošanas ilgums	Iekšējā baterija – līdz 2,5 stundām Ārējā baterija – līdz 10 stundām
Uzlādes laiks	Iekšējā baterija – vidēji 1 stunda Ārējā baterija – vidēji 2,5 stundas
Baterijas veids un kalpošanas laiks	LiPo baterija ar minimālo kalpošanas laiku līdz 1000 uzlādes reizēm (vidēji 20% kapacitātes zudums pēc 1000 uzlādes reizēm)
Darba temperatūra	-10 līdz +50°C
Spiediena jutība	<0,2 MB
Baterijas brīdinājuma laiks	>15 min (normālos apstākļos)
Baterijas brīdinājuma signāls	Mirgo viens sarkans LED gaismas signāls un ik pēc 5 sekundēm dzirdami pīkstieni
Minimālais brīvās plūsmas gaiss	200 L/min
Minimālā filtra brīvā plūsma	100 L/min
Spiediena robeža	≤2 millibar
Spiediena signāls	Mirgo divi sarkani LED gaismas signāli un ik pēc 1 sekundes dzirdami pīkstieni
Baterijas uzlādes parametri	Ievade 100–240 V AC Izvade 0,7 A
Maskas svars un materiāls	Mazs 92 g, Vidējs 102 g, Liels 112 g, PET, TPE
Ventilatora svars un materiāls	165 g, ABS, elektroniskā un LiPo baterija
Filtra svars un materiāls	70 g, ABS plastika un HEPA stikla šķiedra
Lences svars un materiāls	33 g, kokvilna un elastāns
Ārējās baterijas svars	200 g
Baterijas kabeļa svars	48 g
Kopējais svars	Mazs 430 g, Vidējs 440 g, Liels 450 g
Kalibrēšana	Piespiest un turēt divas pogas 5 sekundes elektroniskai kalibrēšanai, papildus aprīkojums nav nepieciešams
Uzglabāšanas nosacījumi	Ilgtermiņa uzglabāšana (>6 mēneši): No 17°C līdz 28°C pie <60% relatīvā mitruma (RH) Vidēji ilgā uzglabāšana (1–6 mēneši): no -0°C līdz +38°C Īstermiņa uzglabāšana (<1 mēnesi): no -20°C līdz 40°C pie <30% RH
Garantija	12 mēneši vai 2000 stundas ventilatora blokā, uzrādot kvīti. Skatīt pilnu garantiju lietošanas instrukcijā.
Patenta Nr.	D755953